


Solo per uso professionale

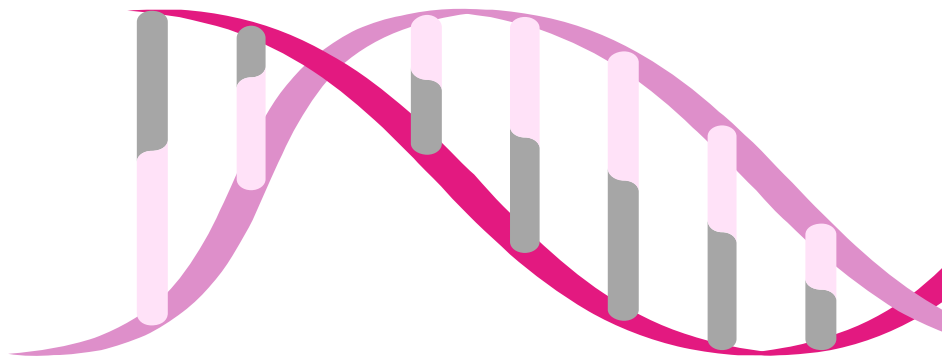

ULISSE  
BioMed

*We build using DNA:  
the molecule of life*

Sagitta™

## HPV Selfy

### ISTRUZIONI PER L'USO

Saggio multiplex in real-time PCR per il rilevamento e la genotipizzazione di 14 genotipi di HPV ad alto rischio validato per lo screening per il tumore della cervice uterina

**14 genotipi di HPV ad alto rischio:**

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68




REF UBM0002



#### ALTA SENSIBILITÀ E SPECIFICITÀ

PCR real-time multiplex ad alta sensibilità e specificità grazie alla tecnologia brevettata SAGITTA™

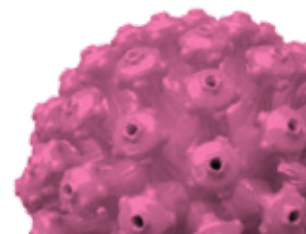

## **NOTE LEGALI**

Copyright © 2023 di Ulisse Biomed S.p.A.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o mediante alcun mezzo, elettronico o meccanico, fra cui fotocopia, registrazione o qualsiasi sistema di conservazione o recupero delle informazioni, senza l'autorizzazione scritta di Ulisse Biomed S.p.A. Per richieste di autorizzazione scrivere a Ulisse Biomed S.p.A., all'indirizzo aziendale, all'attenzione del coordinatore delle autorizzazioni.

Ulisse Biomed S.p.A. si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti e servizi in qualsiasi momento. Il presente manuale di istruzioni è soggetto a modifiche senza preavviso. Sebbene siano state redatte al fine di garantirne l'accuratezza, Ulisse Biomed S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per errori o per qualsiasi danno derivante dall'applicazione o dall'uso delle presenti informazioni.

## **MARCHI REGISTRATI**

I marchi registrati utilizzati in questo documento, anche se non espliciti, non sono da considerarsi non tutelati dalla legge. Questo prodotto e il suo utilizzo sono coperti da brevetti di Ulisse Biomed S.p.A.

## INDICE

INDICE.....	3
1. Descrizione del prodotto.....	4
Destinazione d'uso .....	4
Panoramica dei principi e della procedura del test.....	4
Conservazione e manipolazione .....	4
Materiali forniti.....	5
Materiali necessari ma non forniti.....	5
2. Avvertenze e precauzioni.....	7
Avvertenze e precauzioni generali.....	7
Avvertenze e precauzioni per la biologia molecolare .....	7
3. Protocollo.....	8
Raccolta, conservazione e trasporto del campione .....	8
Procedura per CFX96™, QuantStudio™ 5.....	9
Procedura per ELITE InGenius®.....	17
Procedura per HYRIS bCUBE™.....	29
4. Limiti.....	40
5. Prestazioni del prodotto.....	41
Sensibilità analitica .....	41
Specificità analitica (cross-reattività) .....	41
Interferenza.....	42
Riproducibilità analitica .....	42
Ripetibilità analitica .....	42
Prestazioni cliniche.....	42
Riproducibilità intra- e inter-laboratorio .....	42
Capacità di genotipizzazione .....	43
Referenze .....	43
6. Spiegazione dei simboli.....	44
7. Contatti.....	45

## 1. Descrizione del prodotto

### Destinazione d'uso

"HPV Selfy" è un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* (IVD) destinato alla rilevazione qualitativa multipla e alla differenziazione degli acidi nucleici di 14 Papillomavirus umani ad alto rischio (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) con reazione a catena della polimerasi (PCR) in real-time a partire da tamponi cervicali, tamponi vaginali e campioni citologici cervicali in fase liquida.

Il prodotto è destinato all'uso professionale come test di screening di routine per il tumore alla cervice uterina, come test di triage, di co-testing e di screening primario basato su HPV DNA test, insieme ai dati clinici del paziente e ad altri risultati di test di laboratorio.

I risultati positivi indicano la presenza di DNA di uno o più dei 14 tipi di HPV, ma non forniscono informazioni sulla presenza di infezione batterica o di coinfezioni di altri virus, inclusi altri tipi di HPV oncogeni o non oncogeni.

I risultati negativi non precludono l'infezione da HPV e, pertanto, HPV Selfy non può essere l'unico strumento diagnostico per valutare possibili trattamenti e indagini. I risultati negativi devono essere combinati con le osservazioni cliniche, l'anamnesi del paziente e le informazioni epidemiologiche.

### Panoramica dei principi e della procedura del test

Il test HPV Selfy si basa sulla tecnologia SAGITTA di proprietà di Ulisse Biomed S.p.A. che consente il rilevamento simultaneo di più agenti patogeni in un singolo canale di fluorescenza con strumenti PCR real-time mediante l'analisi della curva di *melting*.

HPV Selfy è un test PCR multiplex in real-time che consente l'amplificazione, il rilevamento e la differenziazione simultanea degli acidi nucleici bersaglio di 14 tipi di HPV ad alto rischio (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), oltre al Controllo Interno (IC).

HPV Selfy effettua la reazione di amplificazione partendo dal DNA estratto da ogni campione in esame. HPV Selfy è compatibile anche con campioni non purificati previo trattamento con Ulisse Faster DNA (Ulisse Biomed, S.p.A.; codice #UBM0014; non incluso nel presente kit), un reagente che permette di evitare l'estrazione del DNA.

Un controllo interno (IC) è incorporato nel prodotto come controllo endogeno dell'intero processo al fine di monitorare l'isolamento degli acidi nucleici e verificare l'eventuale inibizione della PCR. L'IC viene amplificato simultaneamente con gli acidi nucleici target. HPV Selfy utilizza la  $\beta$ -globina umana come IC endogeno che può garantire la purificazione del DNA, la verifica della reazione PCR e l'adeguatezza della qualità di ciascun campione.

Il test HPV Selfy consiste in due reazioni PCR:

- la prima consente l'amplificazione simultanea del DNA target di 14 tipi di HPV ad alto rischio (HR HPV PCR Mix);
- la seconda consente l'amplificazione del DNA target della  $\beta$ -globina umana ( $\beta$ -globin PCR Mix).

Nella PCR, l'efficienza può essere ridotta dagli inibitori eventualmente presenti nei campioni clinici.

### Conservazione e manipolazione

I componenti di HPV Selfy devono essere conservati a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C, in posizione verticale e al riparo dalla luce. Tutti i componenti sono stabili nelle condizioni di conservazione raccomandate fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta. Evitare lo scongelamento e il congelamento ripetuti, in quanto ciò potrebbe ridurre la sensibilità. HPV Selfy può essere congelato e scongelato per non più di 6 volte; ulteriori cicli di congelamento/scongelamento possono causare una perdita di prestazioni del prodotto. Se i reagenti devono essere utilizzati solo in modo intermittente, devono essere congelati in aliquote in provette prive di RNasi/DNasi.

## Materiali forniti

I reagenti contenuti in un kit di HPV Selfy (Ulisse Biomed, S.p.A.; codice #UBM0002-050) sono sufficienti per 18 test, inclusi i controlli, in condizioni ottimali di consumo dei reagenti (almeno 3 test per sessione) se utilizzati con ELITe InGenius®.

I reagenti contenuti in un kit di HPV Selfy (Ulisse Biomed, S.p.A.; codice #UBM0002-050) sono sufficienti per 50 test in associazione con altri sistemi, inclusi i controlli.

HPV Selfy ( <b>REF</b> UBM0002-050)			
Contenuto	Volume	Descrizione	Colore
HR HPV Mix	1 X 0,35 mL	Soluzione tampone contenente DNA sintetico per l'amplificazione specifica di 14 tipi di HPV ad alto rischio.	Giallo
β-globin Mix	1 X 0,35 mL	Soluzione tampone contenente DNA sintetico per l'amplificazione specifica della β-globina.	Rosa
Reaction Mix (DNA)	1 X 1,50 mL	Soluzione tampone contenente reagenti di amplificazione e rilevamento.	Bianco
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	1 X 0,10 mL	Soluzione di cloruro di magnesio 25 mM.	Verde
Positive Control (HPV HR)	1 X 0,10 mL	Soluzione tampone contenente segmenti di DNA sintetico di HPV18, 56, 68 e β-globina (5.000 copie/μl).	Rosso
Negative Control	1 X 0,10 mL	Acqua sterile per biologia molecolare.	Bianco

## Materiali necessari ma non forniti

### A. Materiali necessari per tutti i sistemi compatibili:

I seguenti materiali sono necessari per utilizzare HPV Selfy su ogni sistema compatibile:

- acqua sterile per biologia molecolare, priva di RNasi e DNasi.
- Kit di isolamento degli acidi nucleici (vedi Isolamento degli acidi nucleici).
- Provette con tappo in polipropilene da 1,5 mL e 5 mL, sterili, prive di RNasi e DNasi.
- Pipette di precisione calibrate in grado di erogare 2-20 μl (incrementi di 0,1-0,2 μl), 20-200 μl (incrementi di 0,1-0,2 μl) e 100-1.000 μl (incrementi di 1-2 μl).
- Puntali con filtro anti-aerosol, monouso, sterili a bassa ritenzione per pipette di precisione da 2-20 μl, 20-200 μl e 100-1.250 μl, senza nucleasi.
- Centrifuga da banco.
- Agitatore vortex.
- Cappa biologica a flusso laminare di classe II.
- QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Inc.), CFX96™ Real-time PCR detection system (Bio-Rad Laboratories, Inc.), strumento ELITe InGenius® (ELITechGroup, S.p.A.) o HYRIS bCUBE™ (HYRIS, S.r.l.), calibrati secondo le istruzioni del produttore.
- Ghiaccio.
- Guanti monouso di nitrile senza polvere, o materiale simile, e adeguati dispositivi di protezione individuale.

## **B. Materiali necessari per QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Inc.)**

Per l'utilizzo con lo strumento QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Inc.) sono richiesti i seguenti materiali:

- Piastre: MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate (Applied Biosystems, Inc.; code #N8010560).
- Microfilm: MicroAmp™ Optical Adhesive Film (Applied Biosystems, Inc.; code #4311971).
- Soluzione tampone fosfato 1X (PBS).

## **C. Materiali necessari per CFX96™ Real-Time PCR detection system (Bio-Rad Laboratories, Inc.)**

Per l'utilizzo con lo strumento CFX96™ Real-Time PCR detection system (Bio-Rad Laboratories, Inc.) sono necessari i seguenti materiali:

- Piastre: Multiplate™ 96-Well PCR Plates, low profile, unskirted, clear (Bio-Rad Laboratories, Inc.; code #MLL9601).
- Microfilm: Microseal 'A' Film (Bio-Rad Laboratories, Inc.; code #MSA5001), Microseal 'B' Film (Bio-Rad Laboratories, Inc.; code #MSB5001) oppure Microseal 'C' Film (Bio-Rad Laboratories, Inc.; code #MSC5001).
- Soluzione tampone fosfato 1X (PBS).

## **D. Materiali necessari per ELITe InGenius® (ELITechgroup, S.p.A.)**

Per l'utilizzo con lo strumento ELITe InGenius® (ELITechGroup, S.p.A.) sono necessari i seguenti materiali:

- cartucce di estrazione "ELITe InGenius® SP 200" (ELITechGroup, S.p.A.; code #INT032SP200).
- Materiali di consumo "ELITe InGenius® SP 200 Consumable Set" (ELITechGroup, S.p.A.; code #INT032CS).
- Cartucce di amplificazione "ELITe InGenius® PCR Cassette" (ELITechGroup, S.p.A.; code #INT035PCR).
- Puntali da 300 µL "Filter tips Axygen" (Axygen BioScience, Inc.; code #TF-350-L-R-S).
- Contenitori "ELITe InGenius® Waste Box" (ELITechGroup, S.p.A.; code #F2102-000).
- Tubi da 2 mL "Sarstedt™ screw cap 2 mL Micro Tube" (Sarstedt, AG & Co.; code #72.694.006).
- Tubi da 0,5 mL "Sarstedt™ screw cap 0,5 mL Micro Tube" (Sarstedt, AG & Co.; code #72.730.005).

Inoltre, sono richiesti i seguenti "Assay Protocol" specifici per il prodotto (ELITechGroup, S.p.A.):

- protocollo di analisi per l'amplificazione del Controllo Positivo "Ulisse UBM0002 HPV Mix\_PC" e "Ulisse UBM0002 Bglobin Mix\_PC".
- Protocollo di analisi per l'amplificazione del Controllo Negativo "Ulisse UBM0002 HPV Mix\_NC" e "Ulisse UBM0002 Bglobin Mix\_NC".
- Protocollo di analisi per l'amplificazione dei campioni "Ulisse UBM0002 HPV Mix\_CYT\_200\_200", "Ulisse UBM0002 HPV Mix\_CS\_200\_200", "Ulisse UBM0002 Bglobin Mix\_CYT\_200\_200" e "Ulisse UBM0002 Bglobin Mix\_CS\_200\_200".

## **E. Materiali necessari per HYRIS bCUBE™ (HYRIS, S.r.l.)**

Per l'utilizzo con lo strumento HYRIS bCUBE™ (HYRIS, S.r.l.) sono necessari i seguenti materiali:

- piastre: cartuccia usa e getta da 16 o 36 pozzetti per HYRIS bCUBE™ con microfilm adesivi associati (HYRIS, S.r.l.; code #HyCT16.01 o #HyCT36.01).
- HYRIS bAPP™: un'interfaccia utente web compatibile con smartphone, tablet, laptop e PC di qualsiasi marca e modello.
- Soluzione tampone fosfato 1X (PBS).

## 2. Avvertenze e precauzioni

Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per l'uso *in vitro*.

Si verificano rari casi di tumore della cervice HPV-negativi. Nessun test di screening del cancro è sensibile al 100%. L'uso di questo dispositivo per lo screening primario del cancro cervicale deve essere intrapreso dopo aver considerato attentamente le caratteristiche prestazionali indicate nelle presenti istruzioni per l'uso, nonché le raccomandazioni delle linee guida professionali. L'uso di questo test non è stato valutato per la gestione di donne con precedente terapia ablativa o escissionale, o che sono in gravidanza, o di età inferiore ai 21 anni, o per la gestione di individui transgender.

### Avvertenze e precauzioni generali

- Maneggiare e smaltire tutti i campioni biologici come se fossero in grado di trasmettere agenti infettivi. Evitare il contatto diretto con i campioni biologici. Evitare schizzi o spruzzi. I materiali che vengono a contatto con i campioni biologici devono essere trattati per almeno 30 minuti con ipoclorito di sodio al 3% o autoclavati per un'ora a 121 °C prima dello smaltimento.
- Maneggiare e smaltire tutti i reagenti e tutti i materiali utilizzati per eseguire il test come se fossero in grado di trasmettere agenti infettivi. Evitare il contatto diretto con i reagenti. Evitare schizzi o spruzzi. I rifiuti devono essere maneggiati e smaltiti nel rispetto di adeguate norme di sicurezza.
- Indossare indumenti protettivi e guanti adeguati, proteggere gli occhi e il viso.
- Non pipettare mai soluzioni con la bocca.
- Non mangiare, bere, fumare o applicare prodotti cosmetici nelle aree di lavoro.
- Lavare con cura le mani dopo aver maneggiato campioni e reagenti.
- Smaltire i residui di reagenti e rifiuti in conformità alla normativa vigente.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni fornite con il prodotto prima di eseguire il test.
- Durante l'esecuzione del test, seguire le istruzioni fornite con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata.
- Non utilizzare il prodotto se, al momento della ricezione, la confezione risulta danneggiata o il sigillo rotto.
- Utilizzare solo i reagenti forniti con il prodotto e quelli consigliati dal produttore.
- Non unire reagenti provenienti da lotti diversi o da diverse provette dello stesso lotto.
- Non utilizzare reagenti di altri produttori.

### Avvertenze e precauzioni per la biologia molecolare

- Le procedure di biologia molecolare richiedono personale qualificato e addestrato per evitare il rischio di risultati errati, soprattutto a causa della degradazione degli acidi nucleici contenuti nei campioni o della contaminazione dei campioni da parte dei prodotti di amplificazione.
- Sono necessari camici, guanti e strumenti dedicati esclusivamente all'esecuzione del test.
- I campioni devono essere idonei e, se possibile, dedicati a questo tipo di analisi. I campioni devono essere maneggiati sotto una cappa a flusso d'aria laminare. Le pipette utilizzate per la manipolazione dei campioni devono essere utilizzate esclusivamente per questo specifico scopo.
- Le cassette o piastre PCR devono essere maneggiate in modo tale da ridurre il più possibile la diffusione del prodotto di amplificazione nell'ambiente al fine di evitare la contaminazione di campioni e reagenti.
- Durante l'esecuzione del test, seguire le istruzioni contenute nel manuale di laboratorio del Papillomavirus umano pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

### 3. Protocollo

#### Raccolta, conservazione e trasporto del campione

##### A. Raccolta del campione

###### Campione citologico cervicale in fase liquida

Il campione cervicale raccolto in terreno ThinPrep® utilizzando una spazzola/spatola endocervicale è stato convalidato per l'uso con HPV Selfy. Seguire le istruzioni del produttore per la raccolta del campione cervicale.

###### Tampone vaginale

Per l'auto-raccolta del campione vaginale, si prega di utilizzare i seguenti materiali secondo le istruzioni del produttore:

- FLOQSwab® regular plus, rounded tip, peelable barcode, no breaking point (Copan Italia, S.p.A.; code #5E046S) per l'auto-prelievo di campioni vaginali.

##### B. Conservazione del campione

La sensibilità di analisi può diminuire se il campione viene ripetutamente congelato e scongelato o conservato per un lungo periodo di tempo. Gli acidi nucleici devono essere estratti dal campione il prima possibile dal momento della raccolta.

###### Campione citologico cervicale in fase liquida

Il campione di cellule cervicali raccolto nel terreno ThinPrep® può essere conservato a 2 ~ 8 °C per un massimo di 6 settimane.

###### Tamponi vaginali

Se il campione di tampone vaginale non viene processato subito dopo la sua ricezione in laboratorio, deve essere conservato a -15° ~ -25 °C e deve essere processato entro un mese.

##### C. Trasporto del campione

Per garantire un'elevata qualità del campione, quest'ultimo deve essere trasportato il prima possibile alla temperatura indicata.

###### Campione citologico cervicale in fase liquida

Il campione di cellule cervicali raccolto in terreno ThinPrep® può essere trasportato a 2 ~ 25 °C.

###### Tamponi vaginali

Il campione di tampone vaginale dovrebbe essere preferibilmente trasportato refrigerato ma può essere anche trasportato a temperatura ambiente (~ + 25 °C) per un periodo non superiore a 7 giorni. Il campione di tampone vaginale deve essere spedito a un laboratorio il prima possibile dopo la raccolta, seguendo le istruzioni del laboratorio per il trasporto. Il campione deve essere trasportato seguendo anche le istruzioni locali e nazionali per il trasporto di materiale patogeno.



## Procedura per CFX96™, QuantStudio™ 5

La procedura per utilizzare HPV Selfy con i suddetti sistemi PCR real-time consiste in sei passaggi:

- A. isolamento degli acidi nucleici.
- B. Preparazione delle mix di amplificazione PCR.
- C. Assemblaggio della piastra di PCR.
- D. Configurazione dello strumento di PCR real-time.
- E. Interpretazione dei risultati dei test.
- F. Controllo qualità.

### A. Isolamento degli acidi nucleici

Vari produttori offrono kit di isolamento degli acidi nucleici. Utilizzare la giusta quantità di campione in base al protocollo in uso. I kit di isolamento indicati di seguito sono stati convalidati per l'uso con HPV Selfy.

#### a. Preparazione di campioni citologici cervicali in fase liquida

Prima del pretrattamento con Ulisse Faster DNA o dell'estrazione del DNA, i campioni citologici cervicali in fase liquida conservati in Thin Prep® devono essere preparati come indicato di seguito:

- omogeneizzare il campione attraverso l'utilizzo del vortex sulla fiala di Thin Prep® per almeno 30 secondi.
- Trasferire 1,5 mL di campione per citologia cervicale in fase liquida dalla fiala Thin Prep® originale in una provetta Eppendorf da 1,5 mL.
- Centrifugare il tubo a 9.000 g per 3 minuti.
- Rimuovere il surnatante manualmente con la pipetta, facendo attenzione a non aspirare il pellet di cellule. Un residuo eccessivo di soluzione Thin Prep® potrebbe causare l'inibizione della successiva reazione PCR.
- Aggiungere 1 ml di soluzione tampone fosfato 1X (PBS) al pellet di cellule e posizionare la provetta sul vortex per almeno 30 secondi.
- Centrifugare il tubo a 9.000 g per 3 minuti.
- Rimuovere il surnatante manualmente con la pipetta, facendo attenzione a non aspirare il pellet di cellule.
- Risospendere in 80 µL di acqua sterile per biologia molecolare.

I campioni preparati possono ora essere pretrattati con Ulisse Faster DNA o estratti con kit di estrazione del DNA seguendo le istruzioni del produttore.

#### b. Preparazione di tamponi vaginali

Prima del pretrattamento con Ulisse Faster DNA o dell'estrazione del DNA, i campioni di tampone vaginale devono essere risospesi come indicato di seguito:

- utilizzare una pipetta con puntale monouso per trasferire 2 mL di acqua sterile per biologia molecolare nella provetta da 5 mL.
- Immergere il tampone nell'acqua con una serie di rapidi movimenti verticali; successivamente e senza essere immerso, il tampone deve essere ruotato premendolo contro le pareti del tubo in modo da favorire la fuoriuscita di quanto più materiale possibile.
- Rendere omogenea la sospensione agitandola su vortex per 10-20 secondi in modo che non sia visibile alcun precipitato.
- I campioni preparati possono ora essere pretrattati con Ulisse Faster DNA o estratti con kit di estrazione del DNA seguendo le istruzioni del produttore.

c. Kit di isolamento compatibili

I seguenti kit di isolamento sono stati convalidati per l'uso con HPV Selfy:

- QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen, Inc.; code #51304).
- Reliaprep™ Blood gDNA Miniprep System (Promega, Corp.; code #A5082).
- Ulisse Faster DNA (Ulisse Biomed, S.p.A.; code #UBM0014).

**B. Preparazione delle mix di amplificazione PCR**

Scongellare i reagenti a temperatura ambiente (~ + 25 °C) per 30 minuti. Mescolare delicatamente, centrifugare il contenuto per 5 secondi. Mantenere tutti i reagenti in ghiaccio durante la preparazione.

Preparare due provette con tappo in polipropilene da 1,5 mL che conterranno rispettivamente la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix; identificare la provetta con un pennarello indelebile.

Preparare la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix: per ogni sessione, unire i seguenti componenti sufficienti per il numero di campioni da testare più un Controllo Positivo e un Controllo Negativo. Tutti i volumi includono un'eccedenza del 10% per l'errore della pipetta.

HR HPV PCR Mix		
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per "n" campioni più 2 controlli
Reaction Mix (DNA)	12,00 $\mu$ L	13,20 x (n + 2) $\mu$ L
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	0,60 $\mu$ L	0,66 x (n + 2) $\mu$ L
HR HPV Mix	5,40 $\mu$ L	5,94 x (n + 2) $\mu$ L
Volume totale	18,00 $\mu$ L	-
$\beta$ -globin PCR Mix		
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per "n" campioni più 2 controlli
Reaction Mix (DNA)	12,00 $\mu$ L	13,20 x (n + 2) $\mu$ L
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	0,60 $\mu$ L	0,66 x (n + 2) $\mu$ L
$\beta$ -globin Mix	5,40 $\mu$ L	5,94 x (n + 2) $\mu$ L
Volume totale	18,00 $\mu$ L	-

Al termine mescolare con il vortex e centrifugare brevemente le mix, evitando la formazione di bolle.

### C. Assemblaggio della piastra di PCR

Caricare 18 µL di HR HPV PCR Mix e 18 µL di β-globin PCR Mix per ciascun campione in due pozzetti separati. Caricare due volte 2 µL di ogni campione biologico (S1, S2, S3, ecc.), di Controllo Positivo (PC) e di Controllo Negativo (NC): una volta nel pozzetto caricato con HR HPV PCR Mix e una volta nel pozzetto caricato con β-globin PCR Mix, come indicato nella figura sottostante.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	S1						S1					
B	S2						S2					
C	S3						S3					
D												
E												
F												
G						PC						PC
H						NC						NC

Sigillare la piastra PCR utilizzando sigilli adesivi adeguati seguendo le istruzioni del produttore.

## D. Configurazione dello strumento di PCR real-time

I file modello per i sistemi PCR real-time compatibili sono disponibili su richiesta. Per caricare il file modello sullo strumento PCR real-time, seguire le istruzioni del software dello strumento. Prima di iniziare la corsa, inserire i nomi dei campioni. Se non si desidera utilizzare i file modello o i file modello non sono disponibili per lo strumento, configurare lo strumento e i protocolli secondo le seguenti indicazioni:

Parametri				Impostazioni	
Volume				20 µL	
Temperatura del coperchio				105 °C	
Reporter per ogni mix				SYBR	
Quencher per ogni mix				Nessuno	
Riferimento passivo (Passive reference) <sup>1</sup>				Nessuno	
Fase	Fase		Tempo	Temperatura	Raccolta dati
PCR	Attivazione della polimerasi		30 sec	98,0 °C	-
	Denaturazione	per 36 cicli	5 sec	98,0 °C	-
	Appaiamento		10 sec	61,5 °C	-
	Estensione		1 sec	72,0 °C	sì
Curva di Dissociazione (Melting curve)	Denaturazione		15 sec	95,0 °C	-
	Inizio dissociazione (melting)		60 sec	60,0 °C	-
	Incremento ottimale della temperatura/tempo <sup>2</sup>		0,1°C / 3 sec		sì
	Fine dissociazione (melting)		1 sec	95,0 °C	-

## E. Interpretazione dei risultati dei test

I valori registrati della fluorescenza nelle reazioni di amplificazione devono essere analizzati dal software dello strumento. L'analisi dei dati viene eseguita con il software del sistema dello strumento e secondo le istruzioni del produttore. I valori di fluorescenza permettono di determinare il ciclo di soglia (Ct), il ciclo in cui la fluorescenza ha raggiunto il valore di soglia (*threshold*). Prima di iniziare l'analisi, impostare il *threshold* come segue:

Strumento PCR	Tipo di campione	Threshold HR HPV PCR Mix	Threshold β-globin PCR Mix
QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Inc.)	Campioni citologici cervicali in fase liquida	710.000	300.000
	Tamponi vaginali	450.000	300.000
CFX96™ Real-time PCR detection system (Bio-Rad Laboratories, Inc.)	Entrambi	800	500

I risultati dei cicli di amplificazione (Ct) sono espressi come un valore numerico tra 1 e 36. Se il risultato di Ct è "Undetermined", significa che non è stato rilevato alcun segnale al di sopra del valore di *threshold* preimpostato. Per l'interpretazione del risultato fare riferimento alla "Tabella interpretativa" alla pagina seguente.

<sup>1</sup> "ROX" è spesso selezionato come riferimento passivo predefinito. Se i file modello non vengono utilizzati, ricorda di deselezionare qualsiasi riferimento passivo.

<sup>2</sup> Per ottenere una genotipizzazione di HPV precisa, impostare il parametro di incremento della temperatura <0,2°C (l'incremento ottimale è 0,1°C).

### Tabella interpretativa

Ct HR HPV PCR Mix	Ct β-globin PCR Mix	Tm HR HPV PCR Mix	Tm β-globin PCR Mix	Stato del test	Risultato	Interpretazione	Azione suggerita
Valore numerico	Valore numerico	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Valido	HPV Rilevato	Campione positivo per uno o più tipi di HPV - Genotipizzazione possibile	Assegnare il genotipo/i utilizzando la "Tabella di genotipizzazione per QuantStudio™ 5"
Indeterminato	Valore numerico < 30	-	Compresa o fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Valido	HPV Non Rilevato	Campione negativo	-
Valore numerico	Indeterminato	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	-	Valido	HPV Rilevato - Genotipo non determinabile	Campione positivo per uno o più tipi di HPV - Genotipizzazione non possibile	Vedere "Risoluzione dei problem per QuantStudio™ 5"
Valore numerico	Valore numerico	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Valido	HPV Rilevato - Genotipo non determinabile	Campione positivo per uno o più tipi di HPV - Genotipizzazione non possibile	Vedere "Risoluzione dei problemi per QuantStudio™ 5"
Valore numerico	Valore numerico	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Valido	HPV Non Rilevato	Campione negativo	Vedere "Risoluzione dei problemi per QuantStudio™ 5"
Valore numerico	Valore numerico	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Invalido	HPV Indeterminato	-	Vedere "Risoluzione dei problemi per QuantStudio™ 5"
Valore numerico	Indeterminato	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	-	Invalido	HPV Indeterminato	-	Vedere "Risoluzione dei problemi per QuantStudio™ 5"
Indeterminato	Valore numerico > 30 o indeterminato	-	Non calcolata - compresa o fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Invalido	HPV Indeterminato	-	Vedere "Risoluzione dei problemi per QuantStudio™ 5"

Ogni campione che risulti valido e positivo per la presenza di uno o più tipi di HPV ad alto rischio, può essere ulteriormente analizzato per determinare in modo specifico quale/i tipo/i di HPV ad alto rischio è presente.

Il test HPV Selfy consente di discriminare 14 tipi di HPV ad alto rischio, ovvero: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68 mediante l'analisi della temperatura di *melting* (Tm) del DNA amplificato dell'analita. Nel test HPV Selfy, ciascuno dei tipi di HPV ad alto rischio è caratterizzato da uno specifico intervallo di Tm.

Co-infezioni di due o più tipi di HPV ad alto rischio i cui picchi di *melting* sono adiacenti, in alcuni casi, possono originare un unico picco di *melting* con valore di Tm intermedio tra quelli dei singoli tipi di HPV ad alto rischio.

La Tm può essere influenzata da alcuni fattori relativi al campione biologico, principalmente legati al tampone utilizzato nel metodo di isolamento, oltre che dallo strumento di PCR. Si consiglia di verificare che i segnali di Tm originati dal Controllo Positivo corrispondano a quelli indicati nella "Tabella di genotipizzazione" alla pagina seguente.

Tabella di genotipizzazione

HR HPV PCR Mix				
Tipo di HPV	QuantStudio™ 5		CFX96™	
	Temperatura di <i>melting</i> °C		Temperatura di <i>melting</i> °C	
	da	a	da	a
HPV68	72,00	73,20	72,00	73,30
HPV59	73,30	74,10	73,40	73,60
HPV66	74,50	75,30	73,80	75,30
HPV16	76,00	76,95	75,40	76,80
HPV35	77,00	78,00	76,90	77,40
HPV31	78,20	79,45	77,80	78,90
HPV56	79,50	80,00	79,00	79,70
HPV52	80,05	80,40	79,80	80,00
HPV39	80,60	80,90	80,10	80,30
HPV58	81,20	81,80	80,60	81,00
HPV51	81,85	82,40	81,40	81,60
HPV45	82,50	83,95	81,80	82,80
HPV33	84,60	85,30	83,60	84,80
HPV18	85,60	87,00	84,90	87,00
β-globin PCR Mix				
Target	QuantStudio™ 5		CFX96™	
	Temperatura di <i>melting</i> °C		Temperatura di <i>melting</i> °C	
	da	a	da	a
β-globin	75,50	76,80	75,00	77,00

## F. Controllo qualità

Per convalidare i risultati del test, è necessario verificare la validità della corsa PCR (ossia dell'analisi). A tale scopo, sono necessari un Controllo Negativo e un Controllo Positivo per ciascuna sessione di amplificazione PCR, sia per la HR HPV PCR Mix che per la  $\beta$ -globin PCR Mix. Il Controllo Negativo viene utilizzato per verificare che nessun componente sia stato contaminato da acidi nucleici durante la preparazione delle reazioni di amplificazione. Il Controllo Positivo consente di valutare le prestazioni del test. L'analisi è considerata valida quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- il Controllo Positivo HPV HR è caratterizzato da curve di amplificazione nella HR HPV PCR Mix e nella  $\beta$ -globin PCR Mix.
- Il Controllo Negativo non presenta curve di amplificazione né nella HR HPV PCR Mix, né nella  $\beta$ -globin PCR Mix.

Affinché la genotipizzazione sia affidabile bisogna rilevare almeno uno dei tre picchi di *melting* del Controllo Positivo testato con la HR HPV PCR Mix ed il picco di *melting* del Controllo Positivo testato con la  $\beta$ -globin PCR Mix all'interno dei seguenti intervalli di temperatura di *melting* del Controllo Positivo:

PCR Mix	Target	Intervallo delle temperature di <i>melting</i> °C			
		QuantStudio™ 5		CFX96™	
		da	a	da	a
HR HPV PCR Mix	HPV68	72,00	73,20	72,00	73,30
	HPV56	79,50	80,00	79,00	79,70
	HPV18	85,60	87,00	84,90	87,00
$\beta$ -globin PCR Mix	$\beta$ -globin	75,50	76,80	75,00	77,00

Se nel Controllo Negativo viene rilevato un segnale di amplificazione che supera il valore di *threshold* per HR HPV PCR Mix o per  $\beta$ -globin PCR Mix, la piastra risulta invalida e il test deve essere ripetuto dopo aver eliminato la fonte di contaminazione. Pulire l'area di preparazione del campione per la PCR e ripetere il test con un nuovo kit. Assicurarsi che i parametri dello strumento siano impostati correttamente.

Se si osservano anomalie nell'amplificazione del Controllo Positivo la piastra risulta invalida e deve essere ripetuta. In questo caso contattare il fornitore del prodotto.

Se si rilevano anomalie nelle curve di *melting* del Controllo Positivo la piastra è valida ma la genotipizzazione potrebbe non essere affidabile. In questo caso contattare il fornitore del prodotto.

## Risoluzione dei problemi

Tipo di campione	Problema / Errore	Possibile causa	Possibile soluzione
Controllo Positivo	Controllo Positivo invalido: assenza di curve di amplificazione	Errore di pipettaggio.	Prestare attenzione nella dispensazione.
		Errore di preparazione delle mix di amplificazione PCR.	Verificare di avere eseguito correttamente le istruzioni contenute nel paragrafo denominato "Preparazione delle mix di amplificazione PCR".
		Conservazione dei reagenti inadeguata.	Utilizzare una nuova aliquota dei reagenti o un nuovo kit.
		Presenza di DNasi.	Utilizzare consumabili privi di DNasi.
		Fallimento della PCR.	Assicurarsi che i parametri dello strumento siano corretti.
		Presenza di bolle.	Ripetere il test assicurandosi di evitare la formazione di bolle sul fondo del pozzetto.
Controllo Negativo	Controllo Negativo invalido: presenza di curve di amplificazione	Contaminazione locale.	Pulire l'area di preparazione della PCR. Assicurarsi che vengano indossati DPI adeguati per ridurre il rischio di contaminazione.
		Contaminazione dei reagenti.	Usare una nuova aliquota del/i reagente /i contaminato/i.
		Conservazione dei reagenti inadeguata.	Utilizzare una nuova aliquota dei reagenti o un nuovo kit.
		Errore di pipettaggio.	Cambiare sempre i puntali tra un campione e l'altro. Prestare attenzione nella dispensazione.
		Errore di preparazione delle mix di amplificazione PCR.	Verificare di avere eseguito correttamente le istruzioni contenute nel paragrafo denominato "Preparazione delle mix di amplificazione PCR".
		Errore di sigillatura della piastra.	Prestare attenzione nella sigillatura della piastra e seguire le istruzioni del produttore.
Campione biologico	Genotipizzazione non possibile - Test invalido: temperature di <i>melting</i> fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Campione inadeguato.	Verificare la compatibilità e l'idoneità del campione.
		Campione raccolto, conservato o trasportato in maniera inadeguata.	Ripetere l'isolamento del DNA o la raccolta del campione.
		Isolamento del DNA inadeguato.	Verificare la compatibilità del metodo di isolamento del DNA. Ripetere l'isolamento del DNA.
		Contaminazione chimica.	
		Presenza di bolle.	Ripetere il test assicurandosi di evitare la formazione di bolle sul fondo del pozzetto.
	Test invalido: curva di amplificazione nella HR HPV PCR Mix assente e curva di amplificazione della $\beta$ -globin PCR Mix assente o con Ct > 30	Campione inadeguato.	Verificare la compatibilità e l'idoneità del campione.
		Campione raccolto, conservato o trasportato in maniera inadeguata.	Ripetere l'isolamento del DNA o la raccolta del campione.
		Isolamento del DNA inadeguato.	Verificare la compatibilità del metodo di isolamento del DNA. Ripetere l'isolamento del DNA.
		Fallimento della PCR.	Verificare la correttezza dei parametri dello strumento PCR.
		Presenza di bolle.	Ripetere il test assicurandosi di evitare la formazione di bolle sul fondo.
		Presenza di inibitori della PCR.	Provare a diluire il DNA isolato 1:5. Ripetere l'isolamento del DNA o la raccolta del campione.



## Procedura per ELITe InGenius®

La procedura per utilizzare HPV Selfy con il sistema ELITe InGenius® consiste di tre fasi:

- A. verifica del sistema.
- B. Allestimento della sessione.
- C. Revisione ed approvazione dei risultati.

### A. Verifica del sistema

Prima di iniziare la sessione, facendo riferimento alla documentazione dello strumento, è necessario:

- accendere lo strumento ELITe InGenius® e selezionare la modalità di login "CLOSED", verificare che i controlli di amplificazione - Positive Control (HPV HR) e Negative Control - siano stati processati, sia con HR HPV PCR Mix e  $\beta$ -globin PCR Mix in associazione con il lotto di reagente di amplificazione da utilizzare e che siano approvati e non siano scaduti (Status). Se non ci sono controlli di amplificazione approvati o validi, processarli utilizzando gli appositi Assay Protocol riportati nella sezione "Materiali necessari ma non forniti" al punto "E", e come descritto nei paragrafi seguenti;
- scegliere il tipo di corsa, seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia grafica (GUI) per l'allestimento della sessione ed utilizzando gli Assay Protocol forniti da ELITechGroup S.p.A. Questi protocolli IVD sono stati specificatamente validati con HPV Selfy, lo strumento ELITe InGenius® e la matrice citata.

Gli Assay Protocol disponibili per l'analisi dei campioni con il prodotto HPV Selfy sono descritti nella tabella seguente.

Assay Protocol per HPV Selfy			
Nome	Matrice/Eluato	Esito	Caratteristiche
Ulisse UBM0002 HPV Mix_CYT_200_200	Campione citologico cervicale in fase liquida	Positivo/ Negativo	Volume estrazione in ingresso: 200 $\mu$ L Volume di eluizione: 200 $\mu$ L Controllo interno: NO Sonicazione: NO Fattore di diluizione: 1 PCR Mix: HR HPV PCR Mix Volume PCR Mix: 45 $\mu$ L Volume del campione in PCR: 5 $\mu$ L
Ulisse UBM0002 HPV Mix_CS_200_200	Tamponi vaginali	Positivo/ Negativo	Volume estrazione in ingresso: 200 $\mu$ L Volume di eluizione: 200 $\mu$ L Controllo interno: NO Sonicazione: NO Fattore di diluizione: 1 PCR Mix: HR HPV PCR Mix Volume PCR Mix: 45 $\mu$ L Volume del campione in PCR: 5 $\mu$ L
Ulisse UBM0002 Bglobin Mix_CYT_200_200	Campione citologico cervicale in fase liquida	Valido/ Non Valido	Volume estrazione in ingresso: 200 $\mu$ L Volume di eluizione: 200 $\mu$ L Controllo interno: NO Sonicazione: NO Fattore di diluizione: 1 PCR Mix: $\beta$ -globin PCR Mix Volume PCR Mix: 45 $\mu$ L Volume del campione in PCR: 5 $\mu$ L

Nome	Matrice/Eluato	Esito	Caratteristiche
Ulisse UBM0002 Bglobin Mix_CS_200_200	Tamponi vaginali	Valido/ Non Valido	Volume estrazione in ingresso: 200 µL Volume di eluizione: 200 µL Controllo interno: NO Sonicazione: NO Fattore di diluizione: 1 PCR Mix: β-globin PCR Mix Volume PCR Mix: 45 µL Volume del campione in PCR: 5 µL

Se l'Assay Protocol di interesse non è caricato nel sistema, contattare il servizio clienti ELITechGroup competente per il proprio paese/la propria area geografica.

## B. Allestimento della sessione

Il prodotto HPV Selfy, in associazione al sistema ELITe InGenius®, può essere utilizzato per eseguire le seguenti tipologie di sessione:

- sessione integrata (Estrazione + PCR);
- sessione di amplificazione (PCR only);
- sessione di amplificazione del Controllo Positivo e Controllo Negativo (PCR only).

Tutti i parametri necessari per la sessione sono inclusi negli Assay Protocol disponibili sullo strumento e vengono automaticamente richiamati nel momento in cui li si selezionano.

**Nota:** il sistema ELITe InGenius® può essere collegato al "Laboratory Information System" (LIS) attraverso il quale è possibile caricare i dati della sessione di lavoro. Fare riferimento al manuale d'istruzioni dello strumento ELITe InGenius® per ulteriori dettagli.

Di seguito vengono descritti i passaggi principali per la configurazione delle tre tipologie di sessione:

### a. Sessione Integrata

Per impostare una sessione integrata, partendo da un campione primario, eseguire i seguenti passaggi, facendo riferimento alla GUI:

- scongela i reagenti a temperatura ambiente (~ + 25 °C) per 30 minuti. Mescolare delicatamente, centrifugare il contenuto per 5 secondi. Mantenere tutti i reagenti in ghiaccio durante la preparazione.
- Preparare due provette da 2 mL (Sarstedt) che conterranno rispettivamente la HR HPV PCR Mix e la β-globin PCR Mix; identificare la provetta con un pennarello indelebile.
- Preparare la HR HPV PCR Mix e la β-globin PCR Mix secondo le seguenti tabelle:

HR HPV PCR Mix			
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per n ≤ 4	Volume per 4 < n ≤ 6
Reaction Mix (DNA)	30,0 µL	30,0 x (n + 1) µL	30,0 x (n + 2) µL
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	1,5 µL	1,5 x (n + 1) µL	1,5 x (n + 2) µL
HR HPV Mix	13,5 µL	13,5 x (n + 1) µL	13,5 x (n + 2) µL
Volume totale	45,0 µL	-	-
β-globin PCR Mix			
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per n ≤ 4	Volume per 4 < n ≤ 6
Reaction Mix (DNA)	30,0 µL	30,0 x (n + 1) µL	30,0 x (n + 2) µL
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	1,5 µL	1,5 x (n + 1) µL	1,5 x (n + 2) µL
β-globin Mix	13,5 µL	13,5 x (n + 1) µL	13,5 x (n + 2) µL
Volume totale	45,0 µL	-	-

- Al termine, mescolare con il vortex e centrifugare brevemente le mix, evitando la formazione di bolle.
- Selezionare "Perform Run" dalla schermata "Home".
- Assicurarsi che "Extraction Input Volume" sia 200 µL e che "Extraction Elute Volume" sia 200 µL.
- Se necessario, trasferire 200 µL di campione dalla provetta primaria in una "Extraction Tube" ELITE InGenius®.
- Per ogni *Track* (corsia) di interesse compilare il "SampleID" (SID) digitando o scansionando il codice a barre del campione.
- Selezionare l'"Assay Protocol" da utilizzare nella colonna "Assay" (saggio) (i.e. Ulisse UBM0002 HPV Mix\_CYT\_200\_200).
- Assicurarsi che il "Protocol" (protocollo) visualizzato sia: "Extract + PCR" (Estrazione + PCR).
- Selezionare la posizione di caricamento del campione nella colonna "Sample Position":
  - o se viene utilizzato un tubo primario, selezionare "Primary Tube";
  - o se viene utilizzato un tubo secondario, selezionare "Extraction Tube".
- Fare clic su "Next" per proseguire.
- Caricare la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix appena preparati nel "Inventory Block" (Blocco dei reagenti) selezionato seguendo le istruzioni della GUI e inserire il numero di lotto e la data di scadenza del kit HPV Selfy. Fare clic su "Next" per proseguire.
- Caricare e controllare il rack dei puntali nell'"Inventory Area" (area reagenti) selezionata seguendo le istruzioni della GUI. Fare Clic su "Next" per proseguire.
- Caricare le "PCR Cassettes", le cartucce di estrazione "ELITE InGenius® SP 200", tutti i materiali di consumo necessari e i campioni da estrarre, seguendo le istruzioni della GUI. Fare clic su "Next" per continuare il setup.
- Chiudere lo sportello dello strumento.
- Fare clic su "Start" (avvio) per iniziare la corsa.
- Dopo il completamento della corsa, il sistema ELITE InGenius® consente agli utenti di visualizzare, approvare e salvare i risultati, come anche di stampare e salvare il report.

**Nota:** al termine della corsa il campione estratto residuo deve essere rimosso dallo strumento, chiuso, identificato e conservato a -20 °C. Evitare di versare il campione estratto.

**Nota:** al termine della corsa le "PCR Cassette" con i prodotti di reazione e i materiali di consumo devono essere rimossi dallo strumento e smaltiti senza contaminazioni ambientali. Evitare di versare i prodotti di reazione.

### b. Sessione di amplificazione

Per impostare la sessione di amplificazione partendo da un campione già estratto, eseguire i seguenti passaggi come da GUI:

- scongelare i reagenti a temperatura ambiente ( $\sim + 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) per 30 minuti. Mescolare delicatamente, centrifugare il contenuto per 5 secondi. Mantenere tutti i reagenti in ghiaccio durante la preparazione.
- Preparare due provette da 2 mL (Sarstedt) che conterranno rispettivamente la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix; identificare la provetta con un pennarello indelebile.
- Preparare la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix secondo le seguenti tabelle:

HR HPV PCR Mix			
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per $n \leq 4$	Volume per $4 < n \leq 6$
Reaction Mix (DNA)	30,0 $\mu\text{L}$	$30,0 \times (n + 1) \mu\text{L}$	$30,0 \times (n + 2) \mu\text{L}$
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	1,5 $\mu\text{L}$	$1,5 \times (n + 1) \mu\text{L}$	$1,5 \times (n + 2) \mu\text{L}$
HR HPV Mix	13,5 $\mu\text{L}$	$13,5 \times (n + 1) \mu\text{L}$	$13,5 \times (n + 2) \mu\text{L}$
Volume totale	45,0 $\mu\text{L}$	-	-

$\beta$ -globin PCR Mix			
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per $n \leq 4$	Volume per $4 < n \leq 6$
Reaction Mix (DNA)	30,0 $\mu\text{L}$	$30,0 \times (n + 1) \mu\text{L}$	$30,0 \times (n + 2) \mu\text{L}$
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	1,5 $\mu\text{L}$	$1,5 \times (n + 1) \mu\text{L}$	$1,5 \times (n + 2) \mu\text{L}$
$\beta$ -globin Mix	13,5 $\mu\text{L}$	$13,5 \times (n + 1) \mu\text{L}$	$13,5 \times (n + 2) \mu\text{L}$
Volume totale	45,0 $\mu\text{L}$	-	-

- Al termine, mescolare con il vortex e centrifugare brevemente le mix, evitando la formazione di bolle.
- Selezionare "Perform Run" dalla schermata "Home".
- Anche se non verrà eseguita alcuna estrazione, assicurarsi che "Extraction Input Volume" sia 200  $\mu\text{L}$  e che "Extracted Elute Volume" sia 200  $\mu\text{L}$ .
- Per ogni Track (corsia) di interesse compilare il "SampleID" (SID) digitando o scansionando il codice a barre del campione.
- Selezionare l'"Assay Protocol" da utilizzare nella colonna "Assay" (saggio) (i.e. Ulisse UBM0002 HPV Mix\_CYT\_200\_200).
- Selezionare "PCR Only" nella colonna "Protocol" (protocollo).
- Assicurarsi che la posizione di caricamento del campione nella colonna "Sample Position" (posizione del campione) sia "Elution Tube (riga inferiore)". Fare clic su "Next" per proseguire.
- Caricare la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix appena preparate nel "Inventory Block" (blocco dei reagenti) selezionato seguendo le istruzioni della GUI e inserire il numero di lotto e la data di scadenza del kit HPV Selfy. Fare clic su "Next" per proseguire.
- Caricare e controllare il rack dei puntali nell'"Inventory Area" (area reagenti) selezionata seguendo le istruzioni della GUI. Fare Clic su "Next" per proseguire.
- Caricare le "PCR Cassette" e i campioni di acido nucleico estratti seguendo le istruzioni della GUI. Fare Clic su "Next" per proseguire.
- Chiudere lo sportello dello strumento.
- Fare clic su "Start" (avvio) per iniziare la corsa.
- Dopo il completamento della corsa, il sistema ELITe InGenius® consente agli utenti di visualizzare, approvare e salvare i risultati, come anche di stampare e salvare il report.

**Nota:** al termine della corsa il campione estratto residuo deve essere rimosso dallo strumento, chiuso, identificato e conservato a -20 °C. Evitare di versare il campione estratto.

**Nota:** al termine della corsa le "PCR Cassette" con i prodotti di reazione e i materiali di consumo devono essere rimossi dallo strumento e smaltiti senza contaminazioni ambientali. Evitare di versare i prodotti di reazione.

### c. Sessione di amplificazione del Controllo Positivo e del Controllo Negativo

Per impostare la sessione di amplificazione per il Controllo Positivo (Control (HPV HR)) e il Controllo Negativo (Negative Control), eseguire i seguenti passaggi come da GUI:

- scongelare i reagenti a temperatura ambiente (~ + 25 °C) per 30 minuti. Mescolare delicatamente, centrifugare il contenuto per 5 secondi. Mantenere tutti i reagenti in ghiaccio durante la preparazione.
- Preparare due provette da 2 mL (Sarstedt) che conterranno rispettivamente la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix; identificare la provetta con un pennarello indelebile.
- Preparare la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix secondo le seguenti tabelle:

HR HPV PCR Mix			
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per $n \leq 4$	Volume per $4 < n \leq 6$
Reaction Mix (DNA)	30,0 $\mu$ L	$30,0 \times (n + 1)$ $\mu$ L	$30,0 \times (n + 2)$ $\mu$ L
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	1,5 $\mu$ L	$1,5 \times (n + 1)$ $\mu$ L	$1,5 \times (n + 2)$ $\mu$ L
HR HPV Mix	13,5 $\mu$ L	$13,5 \times (n + 1)$ $\mu$ L	$13,5 \times (n + 2)$ $\mu$ L
Volume totale	45,0 $\mu$ L	-	-
$\beta$ -globin PCR Mix			
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per $n \leq 4$	Volume per $4 < n \leq 6$
Reaction Mix (DNA)	30,0 $\mu$ L	$30,0 \times (n + 1)$ $\mu$ L	$30,0 \times (n + 2)$ $\mu$ L
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	1,5 $\mu$ L	$1,5 \times (n + 1)$ $\mu$ L	$1,5 \times (n + 2)$ $\mu$ L
$\beta$ -globin Mix	13,5 $\mu$ L	$13,5 \times (n + 1)$ $\mu$ L	$13,5 \times (n + 2)$ $\mu$ L
Volume totale	45,0 $\mu$ L	-	-

- Al termine, mescolare con il vortex e centrifugare brevemente le mix, evitando la formazione di bolle.
- Scongelare la provetta del Positive Control (HPV HR) per la corsa. Ogni tubo è sufficiente per 2 corse. Mescolare delicatamente e centrifugare il contenuto per 5 secondi. Trasferire almeno 50  $\mu$ L di Positive Control (HPV HR) in 2 "Elution Tubes", forniti con il "ELITe InGenius® SP 200 Consumable Set".
- Scongelare la provetta del Negative Control per la corsa. Ogni tubo è sufficiente per 2 corse. Mescolare delicatamente e centrifugare il contenuto per 5 secondi. Trasferire almeno 50  $\mu$ L di Negative Control in 2 "Elution Tubes", forniti con il "ELITe InGenius® SP 200 Consumable Set".
- Selezionare "Perform Run" dalla schermata "Home".
- Anche se non verrà eseguita alcuna estrazione, assicurarsi che "Extraction Input Volume" sia 200  $\mu$ L e che "Extracted Elute Volume" sia 200  $\mu$ L.
- Nella Track di interesse, selezionare il "Assay Protocol" da utilizzare nella colonna "Assay".
- Nella Track del Positive Control da amplificare con HR HPV PCR Mix, selezionare l'Assay Protocol "Ulisse UBM0002 HPV Mix\_PC" nella colonna "Assay" e inserire il numero di lotto e la data di scadenza del Positive Control (HPV HR).
- Nella Track del Negative Control da amplificare con HR HPV PCR Mix, selezionare l'Assay Protocol "Ulisse UBM0002 HPV Mix\_NC" nella colonna "Assay" e inserire il numero di lotto e la data di scadenza del Negative Control.

- Nella Track del Positive Control da amplificare con  $\beta$ -globin PCR Mix, selezionare l'Assay Protocol "Ulisse UBM0002 Bgloboin Mix\_PC" nella colonna "Assay" e inserire il numero di lotto e la data di scadenza del Positive Control.
- Nella Track del Negative Control da amplificare con  $\beta$ -globin PCR Mix, selezionare l'Assay Protocol "Ulisse UBM0002 Bgloboin Mix\_NC" nella colonna "Assay" e inserire il numero di lotto e la data di scadenza del Negative Control.
- Fare Clic su "Next" per proseguire.
- Caricare la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix appena preparate nel "Inventory Block" (blocco dei reagenti) selezionato seguendo le istruzioni della GUI e inserire il numero di lotto e la data di scadenza del kit HPV Selfy. Fare Clic su "Next" per proseguire.
- Caricare e controllare il rack dei puntali nell' "Inventory Area" (area reagenti) selezionata seguendo le istruzioni della GUI. Fare Clic su "Next" per proseguire.
- Caricare le "PCR Cassettes", i "Positive Control (HPV HR) Elution tubes" e i Negative Control Elution tubes seguendo le istruzioni della GUI. Fare Clic su "Next" per proseguire.
- Chiudere lo sportello dello strumento.
- Fare clic su "Start" (avvio) per iniziare la corsa.
- Dopo il completamento della corsa, il sistema ELITe InGenius® consente agli utenti di visualizzare, approvare e salvare i risultati, come anche di stampare e salvare il report.

**Nota:** al termine della corsa il Controllo Positivo rimanente deve essere rimosso dallo strumento, chiuso, identificato e conservato a -20 °C. Evitare di versare il campione estratto. Il Controllo Negativo rimanente deve essere smaltito.

**Nota:** al termine della corsa le "PCR Cassette" con i prodotti di reazione e i materiali di consumo devono essere rimossi dallo strumento e smaltiti senza contaminazioni ambientali. Evitare di versare i prodotti di reazione.

### C. Revisione ed approvazione dei risultati

Al termine della corsa, viene visualizzata automaticamente la schermata "Results Display" (schermata dei risultati), nella quale vengono mostrati i risultati del campione/controllo e le informazioni relative alla sessione. Da questa schermata è possibile approvare il risultato, stampare o salvare i report ("Sample Report" o "Track Report"). Fare riferimento al manuale d'istruzioni dello strumento ELITE InGenius® per ulteriori dettagli.

**Nota:** il sistema ELITE InGenius® può essere collegato al "Laboratory Information System" (LIS) attraverso il quale è possibile inviare i risultati della sessione di lavoro al data center del laboratorio. Fare riferimento al manuale d'istruzioni dello strumento ELITE InGenius® per ulteriori dettagli.

Il sistema ELITE InGenius® genera i risultati con il prodotto HPV Selfy attraverso la seguente procedura:

- a) validazione dei risultati dell'amplificazione del Controllo Positivo e del Controllo Negativo.
- b) Validazione dei risultati dei campioni.
- c) Refertazione dei risultati dei campioni.

#### a. Validazione dei risultati di amplificazione del Controllo Positivo e del Controllo Negativo

I segnali di fluorescenza emessi dagli ampliconi dei 3 tipi di HPV ad alto rischio (HR HPV PCR Mix) e dal controllo interno ( $\beta$ -globin PCR Mix) nella reazione di amplificazione del Controllo Positivo (Positive Control (HR HPV)) e del Controllo Negativo (Negative Control) vengono analizzati e interpretati dal software ELITE InGenius® con i parametri inclusi negli Assay Protocol "Ulisse UBM0002 HPV Mix\_PC", "Ulisse UBM0002 Bgloboin Mix\_PC", "Ulisse UBM0002 HPV Mix\_NC" e "Ulisse UBM0002 Bgloboin Mix\_NC".

I risultati dell'amplificazione del Controllo Positivo e del Controllo Negativo, specifici per il lotto di reagente di amplificazione utilizzato, vengono registrati nel database (Controls). Possono essere visionati ed approvati da personale qualificato come "Administrator" o "Analyst", seguendo le istruzioni della GUI.

I risultati dell'amplificazione del Controllo Positivo e del Controllo Negativo, specifici per il lotto del reagente di amplificazione, **scadranno dopo 15 giorni**.

I risultati delle corse di amplificazione del Controllo Positivo e del Controllo Negativo vengono utilizzati dal software dello strumento per impostare le "Control Charts" (Carte di Controllo) che monitorano le prestazioni della fase di amplificazione. Fare riferimento al manuale d'istruzioni dello strumento per ulteriori dettagli.

**Nota:** quando si approva il risultato dell'amplificazione del Controllo Positivo, per verificare l'affidabilità della genotipizzazione bisogna controllare i grafici della curva di *melting* delle mix nel report della sessione di lavoro. Le temperature di *melting* ( $T_m$ ) da osservare nel Controllo Positivo sono elencate nella tabella denominata "Temperature di *melting* del Controllo Positivo osservate su ELITE InGenius®" riportata nel seguito. Affinché la genotipizzazione sia affidabile bisogna rilevare almeno due dei tre picchi di *melting* del Controllo Positivo testato con la HR HPV PCR Mix ed il picco di *melting* del Controllo Positivo testato con la  $\beta$ -globin PCR Mix.

**Nota:** quando il risultato dell'amplificazione del Positive Control o del Negative Control non soddisfa i criteri di accettazione, nella schermata "Controls" viene visualizzato il messaggio "not passed" (non passato) e non è possibile approvarlo. In questo caso, la reazione di amplificazione del Positive Control o del Negative Control deve essere ripetuta.

**Nota:** quando il Positive Control e/o il Negative Control viene analizzato insieme ai campioni da testare e il suo risultato non è valido, l'intera sessione non è valida. In questo caso è necessario ripetere anche l'amplificazione di tutti i campioni.

*Temperature di melting del Controllo Positivo osservate su ELITe InGenius®*

PCR Mix	Target del Controllo Positivo	Intervallo delle temperature di melting °C	
		da	a
HR HPV PCR Mix	HPV68	72,0	73,3
	HPV56	79,4	80,1
	HPV18	85,6	87,0
β-globin PCR Mix	β-globin	75,2	77,0



### b. Validazione dei risultati dei campioni

I segnali di fluorescenza emessi dagli ampliconi dei 14 tipi di HPV ad alto rischio (HR HPV PCR Mix) e del controllo interno ( $\beta$ -globin PCR Mix) nelle reazioni di amplificazione del campione vengono analizzati e interpretati dal software dello strumento con i parametri inclusi nell'"Assay Protocol".

I risultati sono mostrati nei report generati dallo strumento ("Result Display", schermata dei risultati).

La corsa del campione può essere approvata quando sono soddisfatte le due condizioni riportate nella tabella seguente:

1) Positive Control	Stato
HR HPV Positive Control "Ulisse UBM0002 HPV Mix_PC"	APPROVATO
HR HPV Positive Control "Ulisse UBM0002 Bgloboin Mix_PC"	APPROVATO
2) Negative Control	Stato
Negative Control "Ulisse UBM0002 HPV Mix_NC"	APPROVATO
Negative Control "Ulisse UBM0002 Bgloboin Mix_NC"	APPROVATO

Per ciascun campione, il risultato del test viene interpretato dal sistema come stabilito dall'algoritmo del software ELITe InGenius® e dai parametri dell'"Assay Protocol".

I possibili messaggi relativi al risultato di un campione sono elencati nella tabella sottostante.

Risultato dell'analisi con HR HPV PCR Mix	Interpretazione
HPV:DNA rilevato Controllare il risultato della Tm	Viene rilevato uno o più tipi di HPV ad alto rischio; viene calcolato il Ct. Controllare i risultati della Tm per ottenere il/i genotipo/i.
HPV:Controllare il risultato della Bgloboin PCR Mix	Se il campione ha un valore di Ct non determinato e un valore di Tm calcolato, il campione è negativo per HPV. Se il campione ha un valore di Ct non determinato e un valore di Tm non calcolato, il campione è negativo per HPV. La validità del campione, in entrambi i casi, dipende dai valori di Ct e Tm della $\beta$ -globina ottenuti.
Risultato dell'analisi con $\beta$ -globin PCR Mix	Interpretazione
Bgloboin:DNA Rilevato Tm nell'intervallo	Il campione ha un valore di Ct per la $\beta$ -globina inferiore a 30 e ha un valore di Tm per la $\beta$ -globina compreso nell'intervallo di accettazione. Il campione è valido.
Bgloboin:DNA Rilevato Tm fuori dall'intervallo - Ritestare il campione	Il campione ha un valore di Ct per la $\beta$ -globina inferiore a 30 ma un valore di Tm fuori dall'intervallo di accettazione. Il campione non è valido.
Invalido – Ritestare il campione	Il campione ha un valore di Ct per la $\beta$ -globina maggiore di 30. Il campione non è valido.

I campioni HPV positivi vengono riportati come "HPV:DNA rilevato Controllare il risultato della Tm" dal software ELITe InGenius®. In questo caso, la genotipizzazione deve essere valutata dopo la corsa,

controllando manualmente i valori di Tm ottenuti.

Se il valore di Ct di HPV viene calcolato e il campione viene riportato come "HPV:DNA rilevato Controllare il risultato della Tm" dal software ELITE InGenius®, ma i valori di Tm non vengono calcolati, l'analisi della curva di dissociazione non è stata eseguita in modo efficiente a causa di problemi con il campione (presenza di inibitori nell'eluato o presenza di polimorfismi interferenti), che possono causare risultati errati. In questo caso, il campione deve essere analizzato nuovamente.

I campioni con valore di Ct non determinato per il target HPV, sia in presenza o in assenza di un valore di Tm calcolato, vengono riportati come "HPV:Controllare il risultato della Bgloboin mix" dal software ELITE InGenius®. In questo caso il campione è considerato negativo per HPV. La validità dipende dal valore di Ct e di Tm ottenuti per la  $\beta$ -globina. In questo caso, se il rispettivo risultato ottenuto con la  $\beta$ -globin PCR Mix è riportato come "Bgloboin:DNA Rilevato Tm nell'intervallo" dal software ELITE InGenius®, il campione è considerato un valido negativo.

I risultati dei campioni relativi al target della  $\beta$ -globina riportati come "Bgloboin:DNA Rilevato Tm fuori dall'intervallo -Ritestare il campione" oppure "Invalido – Ritestare il campione" dal software ELITE InGenius® non sono adatti per l'interpretazione dei risultati. In questo caso, il DNA genomico umano del campione non è stato rilevato in modo efficiente a causa di problemi nella fase di amplificazione o estrazione (degradazione del DNA, perdita di DNA durante l'estrazione, presenza di inibitori nell'eluato o quantità di DNA nel campione non sufficiente), che può causare risultati errati.

Quando il volume dell'eluato è sufficiente, il campione estratto può essere ritestato tramite un ciclo di amplificazione in modalità "PCR Only". Nel caso di un secondo risultato non valido, il campione deve essere rianalizzato a partire dall'estrazione di una nuova aliquota utilizzando la modalità "Extract + PCR".

**Nota:** i risultati ottenuti con questa analisi devono essere interpretati tenendo in considerazione tutti i dati clinici e gli altri esiti dei test di laboratorio relativi al paziente.

**Nota:** quando si approvano i risultati del test, verificare sempre l'esito controllando i grafici della curva di *melting* nel report della sessione di lavoro. Le temperature di *melting* (Tm) di ciascun genotipo HR HPV in analisi sono elencate nella Tabella di Genotipizzazione ELITE InGenius® seguente.

I risultati della corsa del campione sono memorizzati nel database e, se validi, possono essere approvati (Result Display) da personale qualificato come "Administrator" o "Analyst", seguendo le istruzioni della GUI. Dalla finestra "Result Display" è possibile stampare e salvare i risultati della corsa del campione come "Sample Report" e "Track Report".

Tabella di Genotipizzazione per ELITE InGenius®

HR HPV PCR Mix		
Tipo di HPV	Temperatura di melting °C	
	da	a
HPV68	72,0	73,3
HPV59	73,4	74,0
HPV66	74,2	75,2
HPV16	76,0	77,0
HPV35	77,3	78,3
HPV31	78,5	79,2
HPV56	79,4	80,1
HPV52	80,2	80,5
HPV39	80,6	81,0
HPV58	81,1	81,7
HPV51	81,9	82,3
HPV45	82,4	83,0
HPV33	84,8	85,4
HPV18	85,6	87,0
β-globin PCR Mix		
Target	Temperatura di melting °C	
	da	a
β-globin	75,2	77,0

c. Refertazione dei risultati del campione

I risultati dei campioni vengono memorizzati nel database e possono essere visualizzati o esportati come "Sample Report" e "Track Report".

Il "Sample Report" mostra i dettagli di una sessione di lavoro ordinati per campione selezionato (SID).

Il "Track Report" mostra i dettagli di una sessione di lavoro per Track selezionato.

Il "Sample Report" e il "Track Report" possono essere stampati e firmati da personale autorizzato.

## Risoluzione dei problemi per ELITE InGenius®

Tipo di campione	Problema/Errore	Possibili cause	Soluzione
Controllo Positivo	Reazione del Controllo Positivo invalida	Errore di impostazione dello strumento.	Controllare la posizione della HR HPV PCR Mix e del Controllo Positivo. Controllare i volumi della HR HPV PCR Mix e del Controllo Positivo.
		Degradazione del Controllo Positivo	Usare una nuova aliquota di Controllo Positivo (Positive Control (HR HPV)).
		Degradazione della PCR Mix.	Usare una nuova aliquota della HR HPV PCR Mix.
		Errore dello strumento.	Contattare il servizio tecnico di ELITechGroup.
Controllo Negativo	Reazione del Controllo Negativo invalida	Errore di impostazione dello strumento.	Controllare la posizione della HR HPV PCR Mix e del Controllo Negativo. Controllare i volumi della HR HPV PCR Mix e del Controllo Negativo.
		Contaminazione del Controllo Negativo	Usare una nuova aliquota di Controllo Negativo (Negative Control).
		Contaminazione della PCR Mix.	Usare una nuova aliquota della HR HPV PCR Mix.
		Contaminazione dell'area di estrazione, del Racks o del "Inventory Block"	Pulire le superfici con detergenti acquosi, lavare i camici da laboratorio, sostituire le provette e i puntali in uso.
		Errore dello strumento.	Contattare il servizio tecnico di ELITechGroup.
Campione biologico	Reazione del campione invalida o inconcludente	Errore di settaggio dello strumento.	Controllare la posizione della HR HPV PCR Mix e del campione. Controllare i volumi della HR HPV PCR Mix e del campione.
		Degradazione della PCR Mix.	Usare una nuova aliquota della HR HPV PCR Mix.
		Presenza di sostanze interferenti nel campione	Ripetere l'amplificazione in una sessione "PCR only" con una diluizione 1:2 del campione eluito, utilizzando acqua sterile per biologia molecolare.
		Quantità di DNA nel campione non sufficiente.	Ripetere l'estrazione e l'amplificazione con una nuova aliquota del campione in una sessione "Extract + PCR".
		Errore dello strumento.	Contattare il servizio tecnico di ELITechGroup.
N.A.	Errore 30103	Concentrazione di target troppo alta nel campione	Ripetere l'amplificazione in una sessione "PCR only" con una diluizione 1:10 del campione eluito, utilizzando acqua sterile per biologia molecolare.
N.A.	TH Error, SDM error, Ct error	Campione con andamento del grafico anomalo.	Ripetere l'amplificazione in una sessione "PCR only" con una diluizione 1:10 del campione eluito, utilizzando acqua sterile per biologia molecolare.

## Procedura per HYRIS bCUBE™

La procedura per utilizzare HPV Selfy con il sistema HYRIS bCUBE™ consiste di 9 fasi:

- A. Isolamento degli acidi nucleici.
- B. Creazione della ricetta.
- C. Creazione dell'analisi su bAPP™.
- D. Impostazione della cartuccia.
- E. Preparazione delle mix di amplificazione PCR.
- F. Assemblaggio della piastra di PCR.
- G. Avvio dell'analisi.
- H. Interpretazione dei risultati dei test.
- I. Controllo qualità.

### A. Isolamento degli acidi nucleici

Vari produttori offrono kit di isolamento degli acidi nucleici. Utilizzare la giusta quantità di campione in base al protocollo in uso. I kit di isolamento indicati di seguito sono stati convalidati per l'uso con HPV Selfy.

#### a. Preparazione di campioni citologici cervicali in fase liquida

Prima del pretrattamento con Ulisse Faster DNA o dell'estrazione del DNA, i campioni citologici cervicali in fase liquida conservati in Thin Prep® devono essere preparati come indicato di seguito:

- omogeneizzare il campione attraverso l'utilizzo del vortex sulla fiala di Thin Prep® per almeno 30 secondi.
- Trasferire 1,5 mL di campione per citologia cervicale in fase liquida dalla fiala Thin Prep® originale in una provetta Eppendorf da 1,5 mL.
- Centrifugare il tubo a 9.000 g per 3 minuti.
- Rimuovere il surnatante manualmente con la pipetta, facendo attenzione a non aspirare il pellet di cellule. Un residuo eccessivo di soluzione Thin Prep® potrebbe causare l'inibizione della successiva reazione PCR.
- Aggiungere 1 ml di soluzione tampone fosfato 1X (PBS) al pellet di cellule e posizionare la provetta sul vortex per almeno 30 secondi.
- Centrifugare il tubo a 9.000 g per 3 minuti.
- Rimuovere il surnatante manualmente con la pipetta, facendo attenzione a non aspirare il pellet di cellule.
- Risospendere in 80 µL di acqua sterile per biologia molecolare.

I campioni preparati possono ora essere pretrattati con Ulisse Faster DNA o estratti con kit di estrazione del DNA seguendo le istruzioni del produttore.

#### b. Preparazione di tamponi cervicali o vaginali

Prima del pretrattamento con Ulisse Faster DNA o dell'estrazione del DNA, i campioni di tampone vaginale o cervicale devono essere risospesi come indicato di seguito:

- utilizzare una pipetta con puntale monouso per trasferire 2 mL di acqua sterile per biologia molecolare nella provetta da 5 mL.
- Immergere il tampone nell'acqua con una serie di rapidi movimenti verticali; successivamente e senza essere immerso, il tampone deve essere ruotato premendolo contro le pareti del tubo in modo da favorire la fuoriuscita di quanto più materiale possibile.
- Rendere omogenea la sospensione agitandola su vortex per 10-20 secondi in modo che non sia visibile alcun precipitato.
- I campioni preparati possono ora essere pretrattati con Ulisse Faster DNA o estratti con kit di estrazione del DNA seguendo le istruzioni del produttore.

c. Kit di isolamento compatibili

I seguenti kit di estrazione sono stati convalidati per l'uso con HPV Selfy:

- QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen, Inc.; code #51304).
- Reliaprep™ Blood gDNA Miniprep System (Promega, Corp.; code #A5082).
- Ulisse Faster DNA (Ulisse Biomed, S.p.A.; code #UBM0014).

**B. Creazione della ricetta**

1. Aprire il browser e digitare <https://bapp2.HYRIS.net>.
2. Accedere a HYRIS bAPP™ selezionando la regione di appartenenza (i.e. "Europe") ed inserendo user e password.
3. Cliccare sul menù ricette.
4. Cliccare su "Nuova Ricetta".
5. Compilare tutti i campi per la realizzazione della ricetta con le informazioni riportate di seguito.
6. Assegnare il nome della ricetta: inserire un nome univoco per associare la ricetta al kit in uso, ad esempio "Ulisse BioMed – UBM0002 – HPV Selfy".

Parametri da impostare nella ricetta:

Canale di rilevamento		Sì/No		Intensità		Esposizione	
FAM		Sì		100%		50%	
Tipi di pozzetto							
Nome				Descrizione			
HR HPV PCR Mix				14 HR HPV			
β-globin PCR Mix				β-globin			
Tipi di campione							
Nome				Descrizione			
PCHR				Controllo Positivo			
NC				Controllo Negativo			
Sample				Campione			
Fase	Fase			Step ricetta bAPP™	Tempo	Temperatura	Raccolta dati
PCR	Attivazione della polimerasi			Constant temperature step	30 sec	98,0 °C	-
	Denaturazione	per 36 cicli	PCR amplification	5 sec	98,0 °C	-	
	Appaiamento			10 sec	61,5 °C	-	
	Estensione			5 sec	72,0 °C	sì	
Curva di Dissociazione ( <i>Melting curve</i> )	Denaturazione			Constant temperature step	15 sec	95,0 °C	-
	Inizio dissociazione ( <i>melting</i> )			Melting	60 sec	60,0 °C	-
	Rampa di velocità				0,033°C / sec		sì
	Fine dissociazione ( <i>melting</i> )				1 sec	95,0 °C	-

Per l'impostazione del layout di cartuccia e dell'interpretazione assistita dei risultati fare riferimento al manuale delle istruzioni di HYRIS bAPP™.

### C. Creazione dell'analisi su bAPP™

1. Accedere a HYRIS bAPP™ (<https://bapp2.HYRIS.net>) con user e password.
2. Inizializzare una nuova analisi dal menu Analisi facendo clic su "Crea analisi".
3. Compilare la pagina "Informazioni generali":
  - nome dell'analisi.
  - Descrizione (lotto del kit).
4. Selezionare **Usa ricetta personalizzata**.
5. Selezionare dal menu a tendina la ricetta: **Ulisse BioMed – UBM0002 – HPV Selfy**.
6. Premere su "Continua" per andare avanti.

### D. Impostazione della cartuccia

1. Selezionare il tipo di cartuccia tra i layout a 16 e 36 pozzetti.
2. Per ogni campione, scansionare o digitare l'ID del campione nel campo "Nome campione".
3. Quando l'inserimento degli ID è terminato, premere "Continua".
4. Verificare la posizione dei campioni sul layout della cartuccia.
5. Salvare per un momento successivo l'analisi inizializzata trascinando il selettore sopra il pulsante "Fine".
6. Fare clic su "Salva".

**Nota:** si consiglia di identificare con il colore rosso i pozzetti riservati ai Controlli Positivi (uno per ciascuna mix), e con il colore verde i pozzetti riservati ai Controlli Negativi (uno per ciascuna mix).

**Nota:** questo kit è compatibile sia con le cartucce a 16 pozzetti che con quelle a 36 pozzetti.

### E. Preparazione delle mix di amplificazione PCR

Scongellare i reagenti a temperatura ambiente ( $\sim + 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) per 30 minuti. Mescolare delicatamente, centrifugare il contenuto per 5 secondi. Mantenere tutti i reagenti in ghiaccio durante la preparazione.

Preparare due provette con tappo in polipropilene da 1,5 mL che conterranno rispettivamente la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix; identificare la provetta con un pennarello indelebile.

Preparare la HR HPV PCR Mix e la  $\beta$ -globin PCR Mix: per ogni sessione, unire i seguenti componenti sufficienti per il numero di campioni da testare più un Controllo Positivo e un Controllo Negativo. Tutti i volumi includono un'eccedenza del 10% per l'errore della pipetta.

HR HPV PCR Mix		
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per "n" campioni più 2 controlli
Reaction Mix (DNA)	12,00 $\mu\text{L}$	$13,20 \times (n + 2) \mu\text{L}$
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	0,60 $\mu\text{L}$	$0,66 \times (n + 2) \mu\text{L}$
HR HPV Mix	5,40 $\mu\text{L}$	$5,94 \times (n + 2) \mu\text{L}$
Volume totale	18,00 $\mu\text{L}$	-
$\beta$ -globin PCR Mix		
Reagenti	Volume per campione o controllo	Volume per "n" campioni più 2 controlli
Reaction Mix (DNA)	12,00 $\mu\text{L}$	$13,20 \times (n + 2) \mu\text{L}$
MgCl <sub>2</sub> 25mM solution	0,60 $\mu\text{L}$	$0,66 \times (n + 2) \mu\text{L}$
$\beta$ -globin Mix	5,40 $\mu\text{L}$	$5,94 \times (n + 2) \mu\text{L}$
Volume totale	18,00 $\mu\text{L}$	-

Al termine mescolare con il vortex e centrifugare brevemente le mix, evitando la formazione di bolle.



## F. Assemblaggio della piastra di PCR

Caricare 18 µL di HR HPV PCR Mix e 18 µL di  $\beta$ -globin PCR Mix per ciascun campione in due pozzetti separati. Caricare due volte 2 µL di ogni campione biologico (S1, S2, S3, ecc.), di Controllo Positivo (PC) e di Controllo Negativo (NC): una volta nel pozzetto caricato con HR HPV PCR Mix e una volta nel pozzetto caricato con  $\beta$ -globin PCR Mix, come indicato nella figura sottostante dove HR HPV PCR Mix è indicata in blu, e la  $\beta$ -globin PCR Mix è indicata in giallo (Figura A per piastre da 16 pozzetti, Figura B per piastre da 36 pozzetti).



Sigillare la piastra PCR utilizzando sigilli adesivi adeguati seguendo le istruzioni del produttore.

Inserire immediatamente la cartuccia nell'HYRIS bCUBE™ e far partire l'analisi.

**Nota:** Non usare alcun film adesivo non incluso nel packaging delle cartucce fornite da HYRIS, S.r.l.. Non inserire la cartuccia all'interno dell'HYRIS bCUBE™ senza averla prima sigillata con il film adesivo in alluminio.

## G. Avvio dell'analisi

1. Aprire il menu "Analisi" dell'HYRIS bAPP™.
2. Selezionare l'analisi inizializzata.
3. Cliccare sul pulsante "Lancia Analisi".
4. Selezionare il codice seriale (S/N) del bCUBE™.
5. Cliccare sul pulsante "VAI".
6. Alla fine dell'analisi rimuovere la cartuccia dal bCUBE™ e smaltirla in accordo con i regolamenti locali e statali.
7. Al termine dell'analisi i risultati vengono mostrati nella schermata "PCR" dell'Hyris bAPP™.

L'intera procedura è riportata anche nella Guida Pratica per l'Utente, disponibile su HYRIS bAPP™ e sull'HYRIS Help Center <https://support.HYRIS.net>.

## H. Interpretazione dei risultati dei test

I valori registrati della fluorescenza nelle reazioni di amplificazione devono essere analizzati dal software dello strumento. L'analisi dei dati viene eseguita con il software del sistema dello strumento e secondo le istruzioni del produttore.

Al termine della corsa i risultati vengono mostrati nella schermata "PCR" dell'HYRIS bAPP™ (schermata delle curve di amplificazione della corsa), nella quale vengono mostrati i risultati di ciascun campione ed il relativo ciclo soglia (Ct).

I valori di fluorescenza permettono di determinare il ciclo di soglia il ciclo in cui la fluorescenza ha raggiunto il valore di soglia (threshold). Prima di iniziare l'analisi, impostare il threshold come segue, facendo riferimento al manuale di istruzioni dell'HYRIS bAPP™.

PCR Mix	Threshold
HR HPV PCR Mix	30.000
β-globin PCR Mix	10.000

I risultati dei cicli di amplificazione (Ct) sono espressi come un valore numerico tra 1 e 36. Se il risultato di Ct è "Undetermined", significa che non è stato rilevato alcun segnale al di sopra del valore di threshold preimpostato.

Per l'interpretazione del risultato fare riferimento alla "Tabella interpretativa per HYRIS bCUBE™" alla pagina seguente.

*Tabella interpretativa per HYRIS bCUBE™*

Ct HR HPV PCR Mix	Ct β-globin PCR Mix	Tm HR HPV PCR Mix	Tm β-globin PCR Mix	Stato del test	Risultato	Interpretazione	Azione suggerita
Valore numerico	Valore numerico	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Valido	HPV Rilevato	Campione positivo per uno o più tipi di HPV - Genotipizzazione possibile	Assegnare il genotipo/i utilizzando la "Tabella di genotipizzazione per HYRIS bCUBE™"
Indeterminato	Valore numerico < 30	-	Compresa o fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Valido	HPV Non Rilevato	Campione negativo	-
Valore numerico	Indeterminato	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	-	Valido	HPV Rilevato - Genotipo non determinabile	Campione positivo per uno o più tipi di HPV - Genotipizzazione non possibile	Vedere "Risoluzione dei problemi per HYRIS bCUBE™"
Valore numerico	Valore numerico	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Valido	HPV Rilevato - Genotipo non determinabile	Campione positivo per uno o più tipi di HPV - Genotipizzazione non possibile	Vedere "Risoluzione dei problemi per HYRIS bCUBE™"
Valore numerico	Valore numerico	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Compresa nell'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Valido	HPV Non Rilevato	Campione negativo	Vedere "Risoluzione dei problemi per HYRIS bCUBE™"
Valore numerico	Valore numerico	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Invalido	HPV Indeterminato	-	Vedere "Risoluzione dei problemi per HYRIS bCUBE™"
Valore numerico	Indeterminato	Fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	-	Invalido	HPV Indeterminato	-	Vedere "Risoluzione dei problemi per HYRIS bCUBE™"
Indeterminato	Valore numerico > 30 o indeterminato	-	Non calcolata - compresa o fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Invalido	HPV Indeterminato	-	Vedere "Risoluzione dei problemi per HYRIS bCUBE™"

È possibile impostare l'interpretazione assistita dei risultati affinché il sistema interpreti i valori di Ct dei campioni e dei controlli, come anche delle curve di *melting* e determini un risultato interpretato come ad esempio:

- HPV RILEVATO;
- HPV NON RILEVATO.

Per impostare l'interpretazione assistita e le etichette interpretative fare riferimento alla Tabella interpretativa per HYRIS bCUBE™.

La procedura per impostare l'interpretazione assistita è disponibile sul manuale dell'HYRIS bAPP™, su <https://support.hyris.net> oppure contattando lo specialista HYRIS a [support@hyris.net](mailto:support@hyris.net).

Ogni campione che risulta valido e positivo per la presenza di uno o più tipi di HPV ad alto rischio, può essere ulteriormente analizzato per determinare in modo specifico quale/i tipo/i di HPV ad alto rischio è presente.

Il test HPV Selfy consente di discriminare 14 tipi di HPV ad alto rischio, ovvero: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68 mediante l'analisi della temperatura di *melting* (Tm) del DNA amplificato dell'analita. Nel test HPV Selfy, ciascuno dei tipi di HPV ad alto rischio è caratterizzato da uno specifico intervallo di Tm.

Co-infezioni di due o più tipi di HPV ad alto rischio i cui picchi di *melting* sono adiacenti, in alcuni casi, possono originare un unico picco di *melting* con valore di Tm intermedio tra quelli dei singoli tipi di HPV ad alto rischio.

La Tm può essere influenzata da alcuni fattori relativi al campione biologico, principalmente legati al tampone utilizzato nel metodo di estrazione, oltre che dallo strumento di PCR. Si consiglia di verificare che i segnali di Tm originati dal controllo positivo corrispondano a quelli indicati nella "Tabella di genotipizzazione per HYRIS bCUBE™" alla pagina seguente.

Anche l'analisi e l'interpretazione assistita del genotipo possono essere impostati per ciascun campione nell'interpretazione assistita dell'HYRIS bAPP™. I valori numerici di Tm riportati nella "Tabella di genotipizzazione per HYRIS bCUBE™" possono essere associati ad un preciso genotipo ed il risultato può essere mostrato nella sezione dei "RISULTATI" dell'HYRIS bAPP™ o in un report PDF.

Tabella di genotipizzazione per HYRIS bCUBE™

HR HPV PCR Mix		
Tipo di HPV	Temperatura di melting °C	
	da	a
HPV68	71,80	73,19
HPV59	73,20	73,90
HPV66	74,00	75,00
HPV16	75,20	77,00
HPV35	77,20	78,00
HPV31	78,20	79,10
HPV56	79,11	79,75
HPV52	79,76	80,09
HPV39	80,16	80,60
HPV58	80,80	81,30
HPV51	81,50	81,80
HPV45	82,00	83,00
HPV33	84,00	84,99
HPV18	85,00	86,50
β-globin PCR Mix		
Target	Temperatura di melting °C	
	da	a
β-globin	74,00	77,00

## I. Controllo qualità

Per convalidare i risultati del test, è necessario verificare la validità della corsa PCR (ossia dell'analisi). A tale scopo, sono necessari un Controllo Negativo e un Controllo Positivo per ciascuna sessione di amplificazione PCR, sia per la HR HPV PCR Mix che per la  $\beta$ -globin PCR Mix. Il Controllo Negativo viene utilizzato per verificare che nessun componente sia stato contaminato da acidi nucleici durante la preparazione delle reazioni di amplificazione. Il Controllo Positivo consente di valutare le prestazioni del test. L'analisi è considerata valida quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- il Controllo Positivo HPV HR è caratterizzato da curve di amplificazione nella HR HPV PCR Mix e nella  $\beta$ -globin PCR Mix.
- Il Controllo Negativo non presenta curve di amplificazione né nella HR HPV PCR Mix, né nella  $\beta$ -globin PCR Mix.

Affinché la genotipizzazione sia affidabile bisogna rilevare almeno due dei tre picchi di *melting* del Controllo Positivo testato con la HR HPV PCR Mix ed il picco di *melting* del Controllo Positivo testato con la  $\beta$ -globin PCR Mix all'interno dei seguenti intervalli di temperatura di *melting* del Controllo Positivo:

PCR Mix	Target del Controllo Positivo	Intervallo delle temperature di <i>melting</i> °C	
		da	a
HR HPV PCR Mix	HPV68	71,80	73,19
	HPV56	79,11	79,75
	HPV18	85,00	86,50
$\beta$ -globin PCR Mix	$\beta$ -globin	74,00	77,00

Se nel Controllo Negativo viene rilevato un segnale di amplificazione che supera il valore di *threshold* per HR HPV PCR Mix o per  $\beta$ -globin PCR Mix, la piastra risulta invalida e il test deve essere ripetuto dopo aver eliminato la fonte di contaminazione. Pulire l'area di preparazione del campione per la PCR e ripetere il test con un nuovo kit. Assicurarsi che i parametri dello strumento siano impostati correttamente.

Se si osservano anomalie nell'amplificazione del Controllo Positivo la piastra risulta invalida e deve essere ripetuta. In questo caso contattare il fornitore del prodotto.

Se si rilevano anomalie nelle curve di *melting* del Controllo Positivo la piastra è valida ma la genotipizzazione potrebbe non essere affidabile. In questo caso contattare il fornitore del prodotto.

## Risoluzione dei problemi per HYRIS bCUBE™

Tipo di campione	Problema / Errore	Possibile causa	Possibile soluzione
Controllo Positivo	Controllo Positivo invalido: assenza di curve di amplificazione	Errore di pipettaggio.	Prestare attenzione nella dispensazione.
		Errore di preparazione delle mix di amplificazione PCR.	Verificare di avere eseguito correttamente le istruzioni contenute nel paragrafo denominato "Preparazione delle mix di amplificazione PCR".
		Conservazione dei reagenti inadeguata.	Utilizzare una nuova aliquota dei reagenti o un nuovo kit.
		Presenza di DNasi.	Utilizzare consumabili privi di DNasi.
		Fallimento della PCR.	Assicurarsi che i parametri dello strumento siano corretti.
		Errore nell'inserimento della cartuccia.	Assicurarsi di aver inserito adeguatamente la cartuccia nel bCUBE™ nel verso corretto.
		Presenza di bolle.	Ripetere il test assicurandosi di evitare la formazione di bolle sul fondo del pozzetto.
Controllo Negativo	Controllo Negativo invalido: presenza di curve di amplificazione	Contaminazione locale.	Pulire l'area di preparazione della PCR. Assicurarsi che vengano indossati DPI adeguati per ridurre il rischio di contaminazione.
		Contaminazione dei reagenti.	Usare una nuova aliquota del/i reagente /i contaminato/i.
		Conservazione dei reagenti inadeguata.	Utilizzare una nuova aliquota dei reagenti o un nuovo kit.
		Errore di pipettaggio.	Cambiare sempre i puntali tra un campione e l'altro. Prestare attenzione nella dispensazione.
		Errore di preparazione delle mix di amplificazione PCR.	Verificare di avere eseguito correttamente le istruzioni contenute nel paragrafo denominato "Preparazione delle mix di amplificazione PCR".
		Errore di sigillatura della piastra.	Prestare attenzione nella sigillatura della piastra e seguire le istruzioni del produttore.
Campione biologico	Genotipizzazione non possibile - Test invalido: temperature di <i>melting</i> fuori dall'intervallo di temperatura della "Tabella di genotipizzazione"	Campione inadeguato.	Verificare la compatibilità e l'idoneità del campione.
		Campione raccolto, conservato o trasportato in maniera inadeguata.	Ripetere l'isolamento del DNA o la raccolta del campione.
		Isolamento del DNA inadeguato. - Contaminazione chimica.	Verificare la compatibilità del metodo di isolamento del DNA. Ripetere l'isolamento del DNA.
		Errore nell'inserimento della cartuccia	Assicurarsi di aver spinto bene la cartuccia nel bCUBE™ nel verso corretto.
		Presenza di bolle.	Ripetere il test assicurandosi di evitare la formazione di bolle sul fondo.
	Test invalido: curva di amplificazione nella HR HPV PCR Mix assente e curva di amplificazione della β-globin PCR Mix assente o con Ct > 30	Campione inadeguato.	Verificare la compatibilità e l'idoneità del campione.
		Campione raccolto, conservato o trasportato in maniera inadeguata.	Ripetere l'isolamento del DNA o la raccolta del campione.
		Isolamento del DNA inadeguato.	Verificare la compatibilità del metodo di isolamento del DNA. Ripetere l'isolamento del DNA.
		Fallimento della PCR.	Verificare la correttezza dei parametri dello strumento PCR.
		Errore nell'inserimento della cartuccia	Assicurarsi di aver spinto bene la cartuccia nel bCUBE™ nel verso corretto.
		Presenza di bolle.	Ripetere il test assicurandosi di evitare la formazione di bolle sul fondo del pozzetto.
		Presenza di inibitori della PCR.	Provare a diluire il DNA isolato 1:5. Ripetere l'isolamento del DNA o la raccolta del campione.

## 4. Limiti

HPV Selfy rileva il DNA dei 14 tipi di HPV ad alto rischio (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Questo test non rileva il DNA di altri tipi di HPV. HPV Selfy fornisce un risultato qualitativo.

HPV Selfy deve essere utilizzato solo con tamponi cervicali, tamponi vaginali e campioni citologici cervicali in fase liquida. Consultare le istruzioni del produttore per le specifiche tecniche, limitazioni, avvertenze e istruzioni sull'uso dei dispositivi di raccolta del campione. Le prestazioni del metodo non sono state valutate con altri tipi di campioni.

I risultati ottenuti con questo prodotto dipendono da un'adeguata identificazione, raccolta, trasporto, conservazione e trattamento dei campioni. Per evitare risultati errati, è quindi necessario prestare attenzione durante queste fasi e seguire attentamente le istruzioni d'uso fornite con i kit di estrazione degli acidi nucleici. A causa della sua elevata sensibilità analitica, il metodo di amplificazione PCR real-time utilizzato in questo prodotto è sensibile alle cross-contaminazioni derivanti dai campioni positivi, dal Controllo Positivo e dagli stessi prodotti di amplificazione. Le cross-contaminazioni causano risultati "falsi positivi". Il formato del prodotto è in grado di limitare le cross-contaminazioni. Tuttavia, le cross-contaminazioni possono essere evitate solo mediante buone pratiche di laboratorio e seguendo queste istruzioni per l'uso.

La presenza di sangue può interferire con HPV Selfy.

Un risultato negativo ottenuto con questo prodotto significa che la sequenza del DNA bersaglio non viene rilevata nel DNA estratto dal campione. Non si può escludere che il DNA bersaglio abbia una concentrazione inferiore al limite di rilevabilità del prodotto (vedi Prestazioni del prodotto). In questo caso il risultato potrebbe essere un "falso negativo".

Inoltre, i risultati del test possono essere influenzati da un prelievo improprio del campione, da un errore tecnico o dallo scambio di campioni, nonché dalla presenza di sostanze interferenti.

In caso di co-infezioni, la sensibilità per un target può essere influenzata dall'amplificazione di un altro target. Possibili polimorfismi all'interno della regione del DNA bersaglio coperta dai primer e dalle sonde del prodotto possono compromettere il rilevamento corretto del campione.

La prevalenza dell'infezione da HPV in una popolazione può influire sulle prestazioni. Il valore predittivo positivo diminuisce quando si testano popolazioni con bassa prevalenza o individui senza rischio di infezione. L'infezione da HPV non è un indicatore della presenza di una lesione citologica di alto grado (HSIL) o di una lesione intraepiteliale precancerosa (CIN), né implica che si svilupperà una lesione CIN2/3 o un cancro. La maggior parte delle donne infette da uno o più tipi di HPV ad alto rischio non sviluppa CIN2/3 o cancro.

Un test HPV negativo non esclude la possibilità di sviluppare una lesione citologica di alto grado (HSIL) o una lesione intraepiteliale precancerosa CIN2/3 o cancro. Una piccola percentuale di tali lesioni e tumori si verifica in donne che risultano essere negative all'HPV sulla base delle tecnologie esistenti.

HPV Selfy deve essere utilizzato insieme alle informazioni cliniche provenienti da altri test diagnostici e di screening, ispezioni mediche fisiche e anamnesi completa, secondo un'appropriata gestione del paziente. HPV Selfy non deve essere utilizzato come unico metodo di diagnosi e trattamento dei pazienti.

Come con qualsiasi altro dispositivo medico diagnostico, esiste un rischio residuo di risultati non validi, falsi positivi e falsi negativi ottenuti con questo prodotto. Questo rischio residuo non può essere eliminato o ulteriormente ridotto. In alcuni casi, questo rischio residuo potrebbe contribuire a decisioni sbagliate con effetti potenzialmente pericolosi per il paziente.

HPV Selfy non è stato valutato per la gestione di donne con pregresse anomalie citologiche o istologiche, isterectomia, età inferiore a 25 anni o superiore a 64 anni, post menopausa o con altri fattori di rischio (HIV+, immunocompromesse, esposte a dietilstilbestrolo, con precedenti malattie sessualmente trasmissibili).



## 5. Prestazioni del prodotto

Tutti i dati sulle prestazioni sono stati determinati utilizzando l'interpretazione manuale dei risultati e il sistema PCR real-time QuantStudio™ 5 (Applied Biosystems, Inc.). Prestazioni simili sul sistema di rilevamento PCR real-time CFX96™ (Bio-Rad Laboratories, Inc.), sullo strumento ELITE InGenius® (ELITechGroup S.p.A.) e sullo strumento HYRIS bCUBE™ (HYRIS, S.r.l.) sono state stabilite da studi di equivalenza.

### Sensibilità analitica

La sensibilità analitica, o limite di rilevazione (Limit of Detection, LoD), è definita come la concentrazione più bassa che genera un risultato positivo in oltre il 95% dei campioni analizzati. Il LoD di HPV Selfy è stato determinato aggiungendo plasmidi con il genoma completo di HPV a una concentrazione nota. Il LoD di HPV Selfy è di 1000 copie/reazione per tutti i tipi di HPV, ad eccezione di HPV 51, 35 e 39 (10.000 copie/reazione).

### Specificità analitica (cross-reattività)

La potenziale cross-reattività del test HPV Selfy è stata valutata testando un pannello di 17 organismi (batteri, virus e funghi), oltre ad altri 20 tipi di HPV (sia a probabile alto rischio che a basso rischio) e al DNA genomico umano. Nessuna cross-reattività è stata osservata in questo gruppo di agenti patogeni.

Organismo	Concentrazione	Risultato   Ct
Campylobacter jejuni	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Candida albicans	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Chlamydia trachomatis	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Cytomegalovirus	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Gardnerella vaginalis	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Herpes Simplex 1	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Herpes Simplex 2	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
HIV-1 (dsDNA gag-env-pol)	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Human genomic DNA	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
HPV6, 11, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 82	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Mycoplasma genitalium	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Mycoplasma hominis	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Neisseria flava	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Neisseria gonorrhoeae	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Neisseria meningitidis	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Treponema pallidum	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Trichomonas vaginalis	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Ureaplasma parvum	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo
Ureaplasma urealyticum	10 <sup>4</sup> copie/reazione	Negativo

## Interferenza

HPV Selfy utilizza metodi di estrazione degli acidi nucleici convenzionali ben consolidati e, sulla base della nostra esperienza con altri test simili, non si attendono interferenze da sostanze endogene comuni.

Per quanto riguarda l'interferenza delle sostanze nel caso in cui HPV Selfy venga utilizzato direttamente in PCR a seguito di pretrattamento con Ulisse Faster DNA, le seguenti sostanze sono state studiate per l'interferenza. Nessuna interferenza è stata osservata per lavande vaginali contenenti acido ialuronico allo 0,2%, fino al 50% di concentrazione; mentre il sangue ha un potere inibitorio già al 10% di concentrazione. Altre sostanze interferenti non sono state testate.

## Riproducibilità analitica

La riproducibilità di HPV Selfy è stata determinata analizzando plasmidi con il genoma completo di HPV; ogni confronto è stato eseguito da più operatori, ciascuno dei quali ha utilizzato diverse macchine PCR. Il coefficiente di variazione inter-laboratorio (CV) calcolato sui cicli di amplificazione (Ct) è inferiore al 5%.

## Ripetibilità analitica

Il coefficiente di variazione (CV) intra-laboratorio per il valore Ct è stato misurato su 10 replicati di diversi plasmidi con il genoma completo di HPV diluiti a 1.000 copie/reazione, analizzati nella stessa sessione PCR. Tutti i CV trovati sono inferiori al 5%.

## Prestazioni cliniche

Le prestazioni cliniche di HPV Selfy sono state valutate su 98 campioni citologici cervicali in fase liquida di donne di età superiore a 30 anni e istologia >CIN2 e 791 campioni citologici cervicali in fase liquida di donne di età superiore a 30 anni, con citologia negativa e precedente risultato negativo del Pap Test, tutti precedentemente testati con Digene HC2 high-risk HPV DNA (Qiagen, Inc.; code #5197-1330). Questi campioni citologici cervicali in fase liquida sono stati analizzati con HPV Selfy dopo l'estrazione con Reliaprep™ Blood gDNA Miniprep System (Promega, Corp.; codice #A5082). La sensibilità relativa di HPV Selfy rispetto a Digene HC2 high-risk HPV DNA (Qiagen, Inc.; code #5197-1330) eseguito sugli stessi campioni è 0,98 (79/98 HPV Selfy vs 81/98 HC2), mentre la specificità relativa è 1,00 (745/791 HPV Selfy vs 742/791 HC2).

I valori relativi di sensibilità e specificità clinica di HPV Selfy sono stati confrontati con quelli di HC2 utilizzando un test di non inferiorità con una soglia di sensibilità relativa per CIN2+ di 0,90 e una soglia di specificità relativa per CIN2+ di 0,98 utilizzando HC2 come riferimento - come indicato nelle linee guida internazionali di Meijer. Il test di non inferiorità ha dimostrato che la sensibilità clinica e la specificità di HPV Selfy per CIN2+ non sono inferiori a quelle di HC2 (T=2,109; P=0,01747 per sensibilità, T= 2,640 P=0,00414 per specificità).

Un sottogruppo di 144 campioni citologici cervicali in fase liquida (72 positivi e 72 negativi) è stato anche pretrattato con Ulisse Faster DNA (Ulisse Biomed, S.p.A.; codice #UBM0014) e quindi analizzato con HPV Selfy; la concordanza tra i due metodi è stata del 100%.

119 tamponi vaginali auto-prelevati derivati da donne CIN2+ e 791 tamponi vaginali auto-prelevati derivanti da donne con citologia negativa e precedente Pap Test negativo sono stati analizzati con HPV Selfy in confronto con lo stesso test eseguito su campioni citologici cervicali in fase liquida raccolti da medici. HPV Selfy è stato eseguito in combinazione con Ulisse Faster DNA (Ulisse Biomed, S.p.A.; codice #UBM0014). La sensibilità relativa di HPV Selfy è 0,97 mentre la specificità relativa è 0,97. Pertanto, il test HPV Selfy soddisfa i requisiti indicati nel protocollo VALHUDES per l'uso dei test HR-HPV DNA su campioni raccolti autonomamente secondo l'analisi di non inferiorità (sensibilità relativa >0,90 con T=1,70, p=0,044; specificità relativa >0,95 con T=1,864, p= 0,0031).

## Riproducibilità intra- e inter-laboratorio

La riproducibilità intralaboratorio è stata determinata analizzando 521 campioni selezionati casualmente, di cui 157 erano HC2 positivi (30,13%), due volte, nello stesso laboratorio. La concordanza complessiva osservata è stata del 94,6% con un valore kappa di 0,87 (95% CI, da 0,83 a 0,92).

La riproducibilità interlaboratorio è stata determinata analizzando 500 campioni selezionati casualmente, di cui 150 HC2 positivi (30%), analizzati da due laboratori indipendenti. La concordanza osservata è stata del 93,6% con un valore kappa di 0,85 (95% CI, da 0,80 a 0,90). I valori kappa di Cohen associati ai dati relativi alla riproducibilità intra- e interlaboratorio sono superiori al valore minimo richiesto nelle linee guida internazionali di Meijer, dimostrando che il test in esame produce risultati affidabili. In conclusione, HPV Selfy soddisfa pienamente i requisiti di Meijer per lo screening primario dell'HPV.

### Capacità di genotipizzazione

Per valutare la capacità di genotipizzazione dell'HPV Selfy, una selezione random di 59 campioni positivi all'HPV Selfy è stata analizzata ulteriormente con il test CLART® HPV4 (Genomica, SAU; codice #CS-0215-48), in grado di effettuare la genotipizzazione di tutti i ceppi rilevati da HPV Selfy. CLART ha identificato 88 diverse infezioni virali, mentre 81 infezioni sono state trovate da HPV Selfy. Nel complesso, la concordanza sulla genotipizzazione dell'HPV tra i due test è stata sostanziale. In questa sottopopolazione, il test CLART ha rilevato meno infezioni da HPV68 e HPV39 rispetto a HPV Selfy, mentre HPV Selfy ha rilevato meno infezioni da HPV59 e HPV66. Abbiamo ripetuto HPV Selfy sugli stessi campioni per stimare la riproducibilità della genotipizzazione e ottenuto una concordanza da sostanziale a perfetto con kappa tipo-specifico nell'intervallo da 0,73 a 1,00.

### Referenze












Meijer et al. *Guidelines for human papillomavirus DNA test requirements for primary cervical cancer screening in women 30 years and older*. Int J Cancer (2009).

Arbyn et al. *VALHUDES: A protocol for validation of human papillomavirus assays and T collection devices for HPV testing on self-samples and urine samples*. Journal of Clinical Virology 107 (2018).

Avian et al. *Clinical validation of full HR-HPV genotyping HPV Selfy assay according to the international guidelines for HPV test requirements for cervical cancer screening on clinician-collected and self-collected samples*. Journal of Translational Medicine (2022).

## 6. Spiegazione dei simboli

Legenda dei simboli utilizzati nel manuale e sulle etichette.

Simbolo	Spiegazione
	Dispositivo medico diagnostico <i>in vitro</i>
	Codice del lotto
	Numero di catalogo
	Utilizzare entro la data
	Limiti della temperatura
	Controllo positivo (Positive Control, PC)
	Controllo negativo (Negative Control, NC)
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Contenuto sufficiente per <n> prove
	Non utilizzare se l'imballaggio non è integro e consultare le istruzioni per l'uso

## 7. Contatti

Contattare il rappresentante locale di Ulisse Biomed per assistenza.



Ulisse Biomed S.p.A.  
Via Camillo Benso di Cavour 20  
33100 - Udine (UD)  
Italy

Assistenza clienti e supporto tecnico: [support@ulissebiomed.com](mailto:support@ulissebiomed.com)

Per maggiori informazioni visita il sito: [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)

